




360° CRIOLIPÓLISIS CRYOCOOL

El aplicador de última generación



5 APLICADOR FÁCIL DE REEMPLAZAR, PARA EL TRATAMIENTO DE TODO EL CUERPO

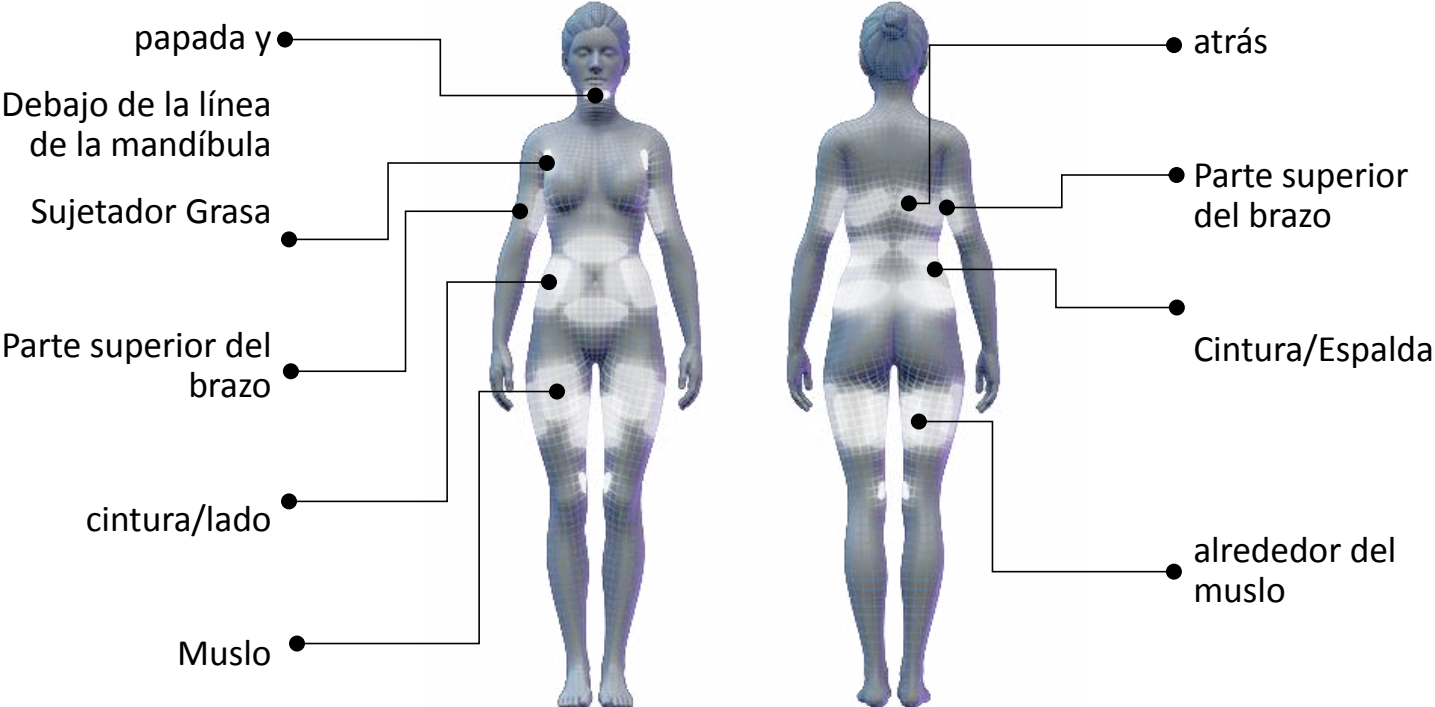

Cabeza de tratamiento P1



Cabeza de tratamiento P2



5 APLICADOR

MÁS ÁREAS DE TRATAMIENTO MÁS EFECTIVAS

Cabeza de tratamiento P3



Cabeza de tratamiento P4





Cabeza de tratamiento P5



VENTAJAS -12°C CENA REFRIGERACIÓN





Enfriamiento en ambos lados

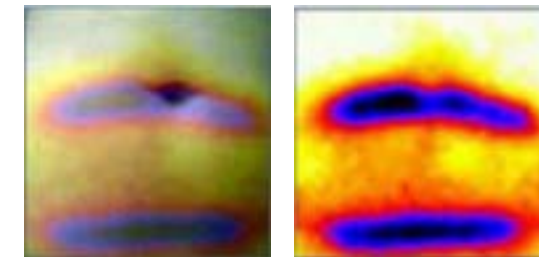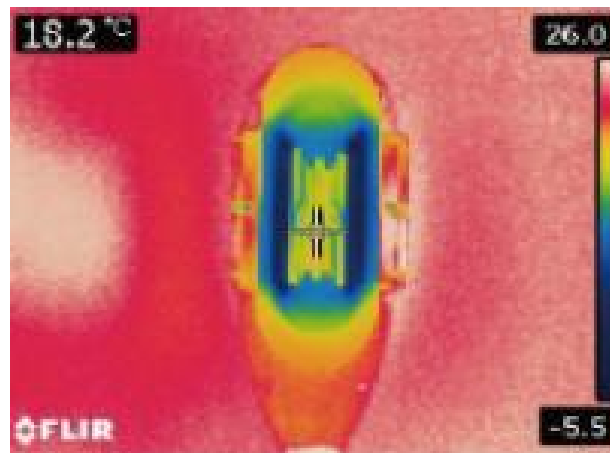

Criolipólisis tradicional por dos Placas de Enfriamiento, solo 40% de efectividad para el área de tratamiento

refrigeración de 360°

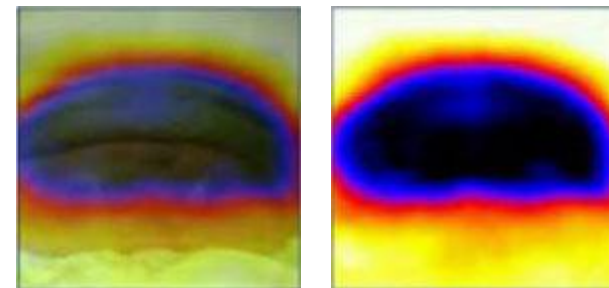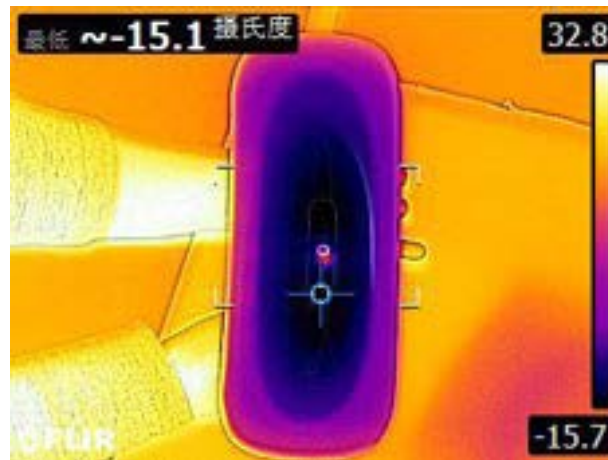

NUEVO aplicador de enfriamiento de 360°
100% efectivo para el área de tratamiento
La temperatura más baja puede alcanzar -12 grados

MECANISMO DE TRABAJO

Después de que la sonda de enfriamiento succiona el tejido adiposo del sitio de cuidado objetivo, la sonda de enfriamiento libera una energía de enfriamiento circundante de 360 grados para actuar sobre las células grasas sin dañar ningún tejido circundante. La energía refrescante constante y poderosa de Cryocool desencadena un proceso de muerte celular natural llamado "apoptosis", después de lo cual las células grasas apoptóticas se excretan a través del proceso metabólico natural del cuerpo. Cryocool apunta a las células grasas para eliminarlas permanentemente del cuerpo, lo que resulta en una pérdida significativa de grasa en el área tratada.



Muchos de nosotros tenemos grasa obstinada a pesar de la dieta y el ejercicio.



Tecnología de calentamiento para acelerar la circulación sanguínea.



Aplicador 360 grados alrededor de las células grasas sin dañar ningún tejido circundante.




En las siguientes semanas, tu cuerpo procesa naturalmente la grasa y elimina estas células muertas.




Los resultados del procedimiento Cryocool son a largo plazo, ya que las células grasas tratadas desaparecen para siempre.

ANTES & DESPUÉS


0day

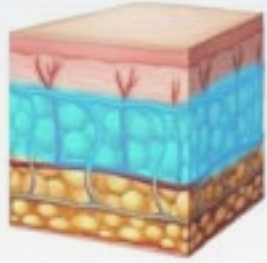

30days

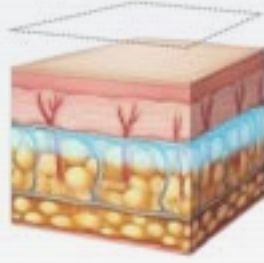

90days

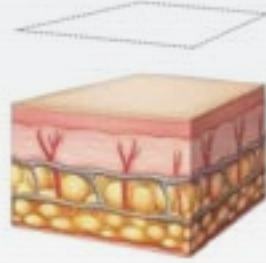

Género: femenino

Edad: 32

Área de tratamiento:
abdomen

Tiempos de tratamientos: 3



Género: femenino

Edad: 35

Área de tratamiento:
abdomen

Tiempos de tratamientos: 2




Género: femenino

Edad: 29



Área de tratamiento: muslo
Tiempos de tratamientos: 4

5-1 APPLICADOR

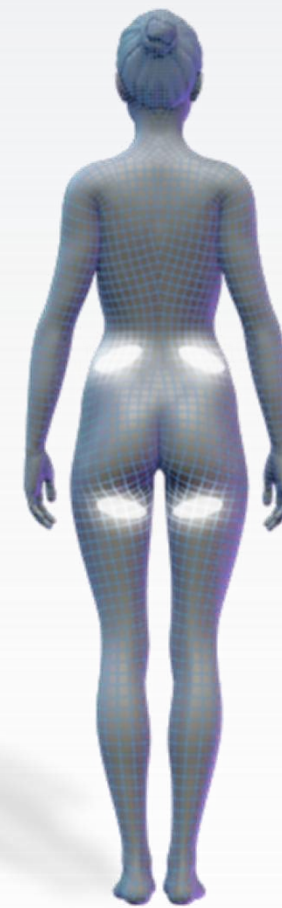

- **Abdomen/Lado**
- **Cintura trasera**
- **Parte posterior del muslo**

5-2 APPLICADOR

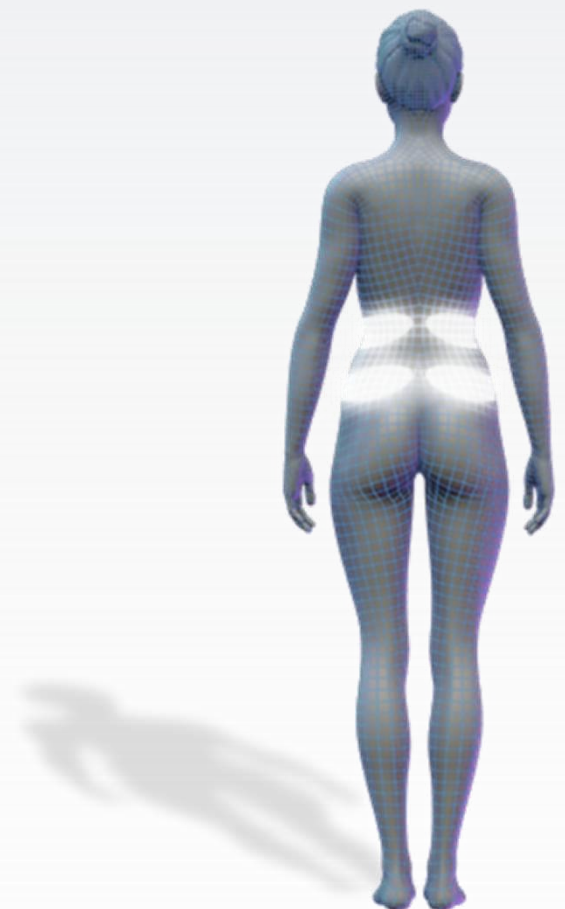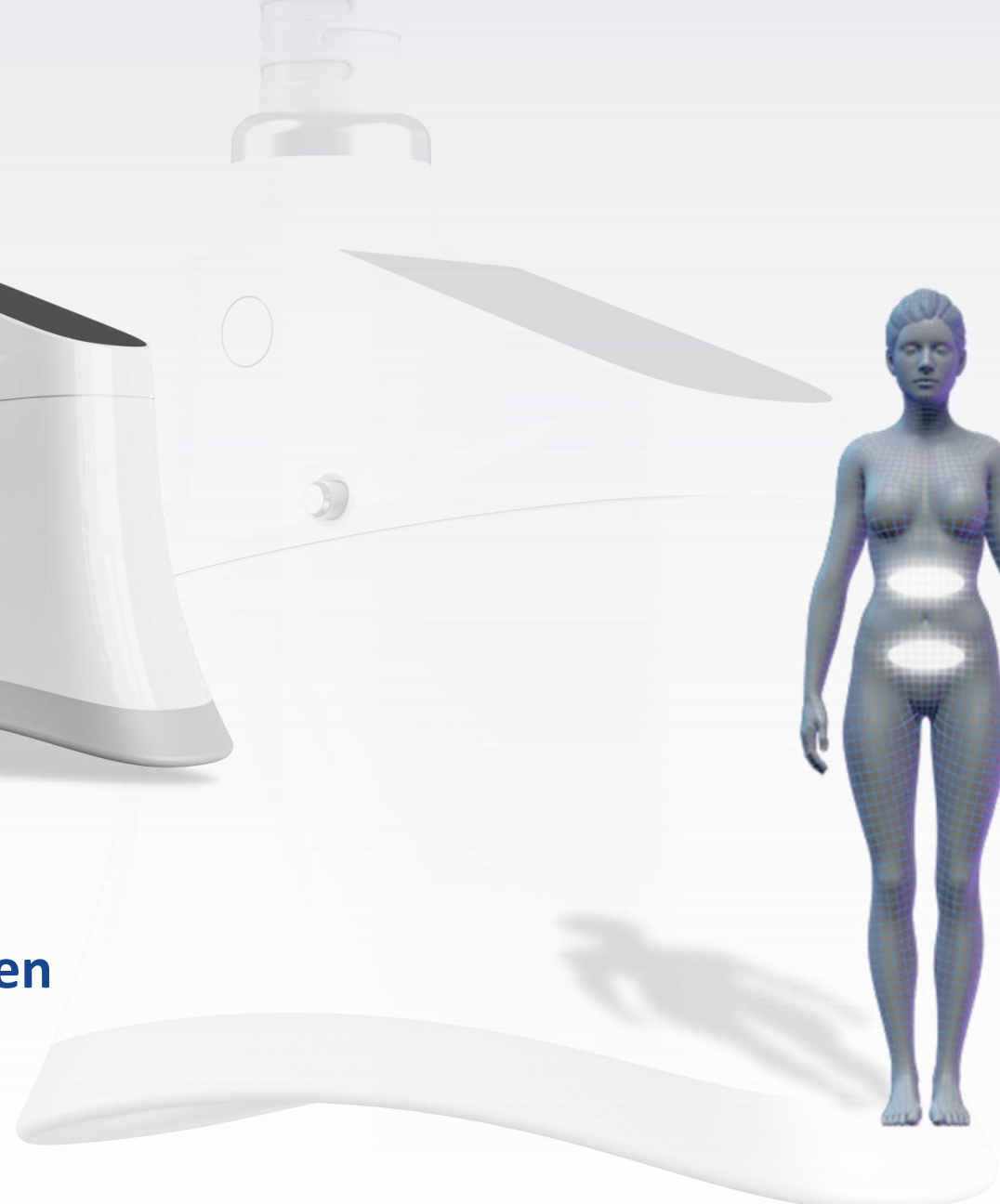

■ Abdomen

■ Atrás

5-3 APPLICADOR





Parte superior del brazo

Abdomen/Lado

Atrás


Muslo

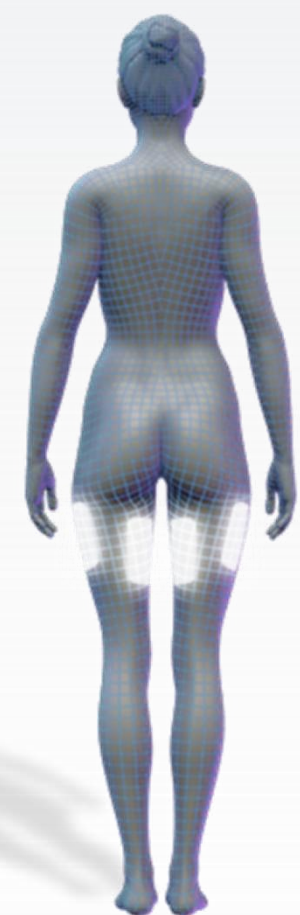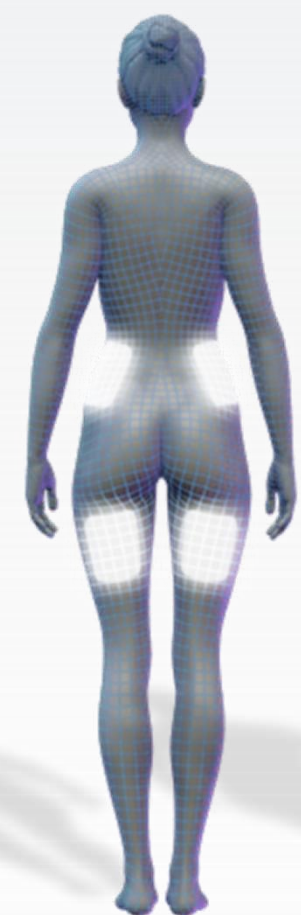

■ Muslo (delantero, trasero, izquierdo y derecho)

■ Lado de la cintura

5-5 APPLICADOR

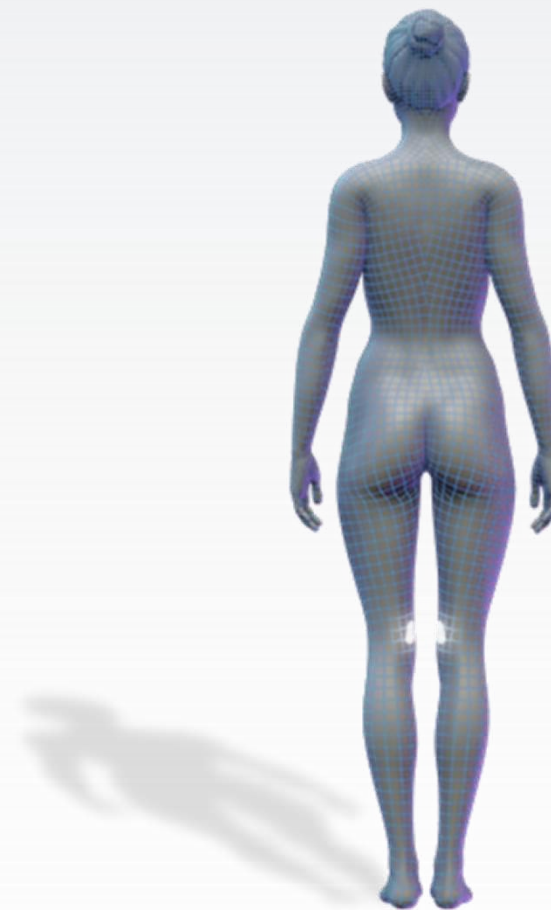

-  Grosero
-  Sujetador Grasa
-  Dentro de la rodilla

VENTAJAS





■ **Silicona médica, segura y cómoda.**




■ **Algodón de filtro médico, filtra eficazmente los desechos**


VENTAJAS PANTALLA TÁCTIL HUMANIZADA

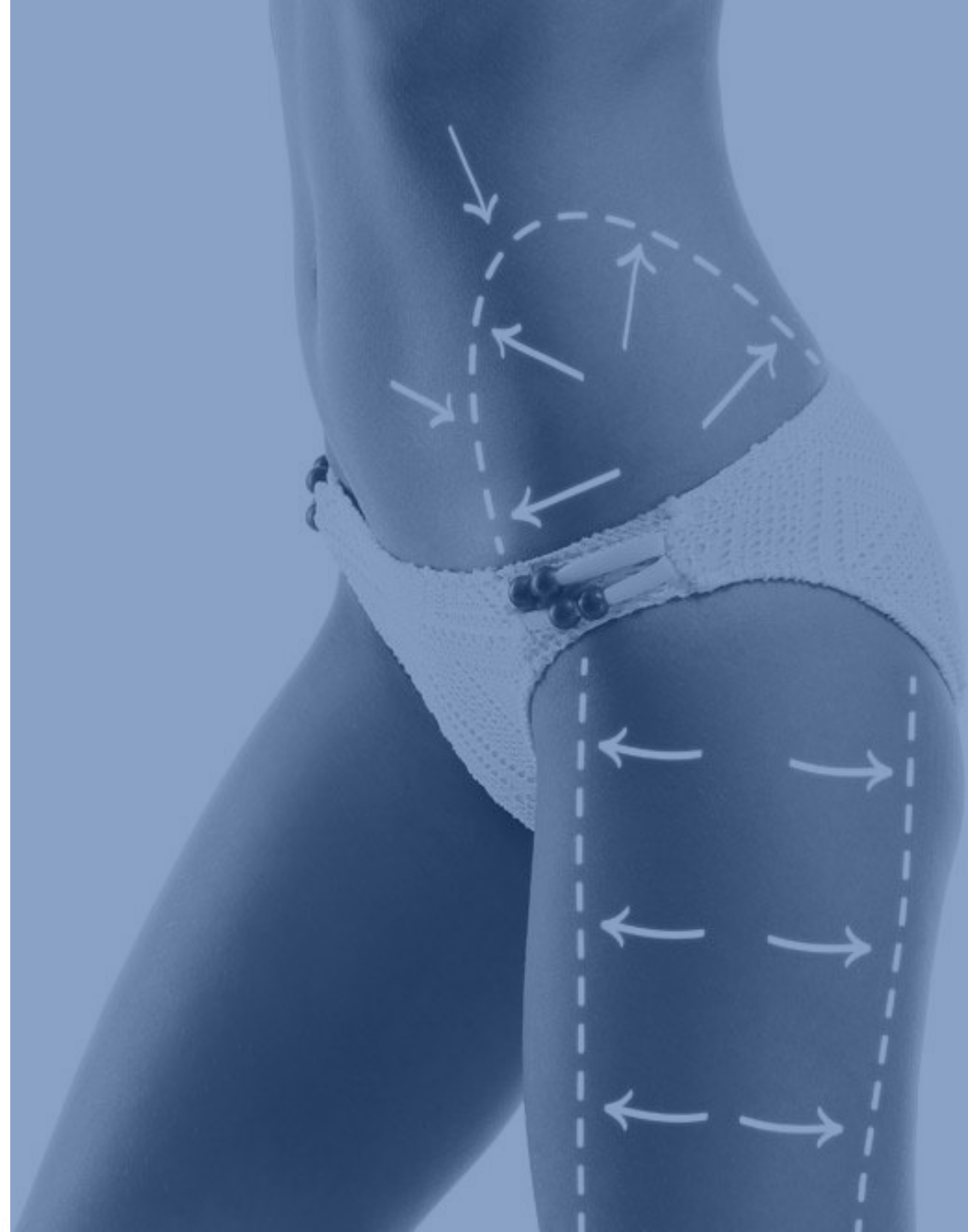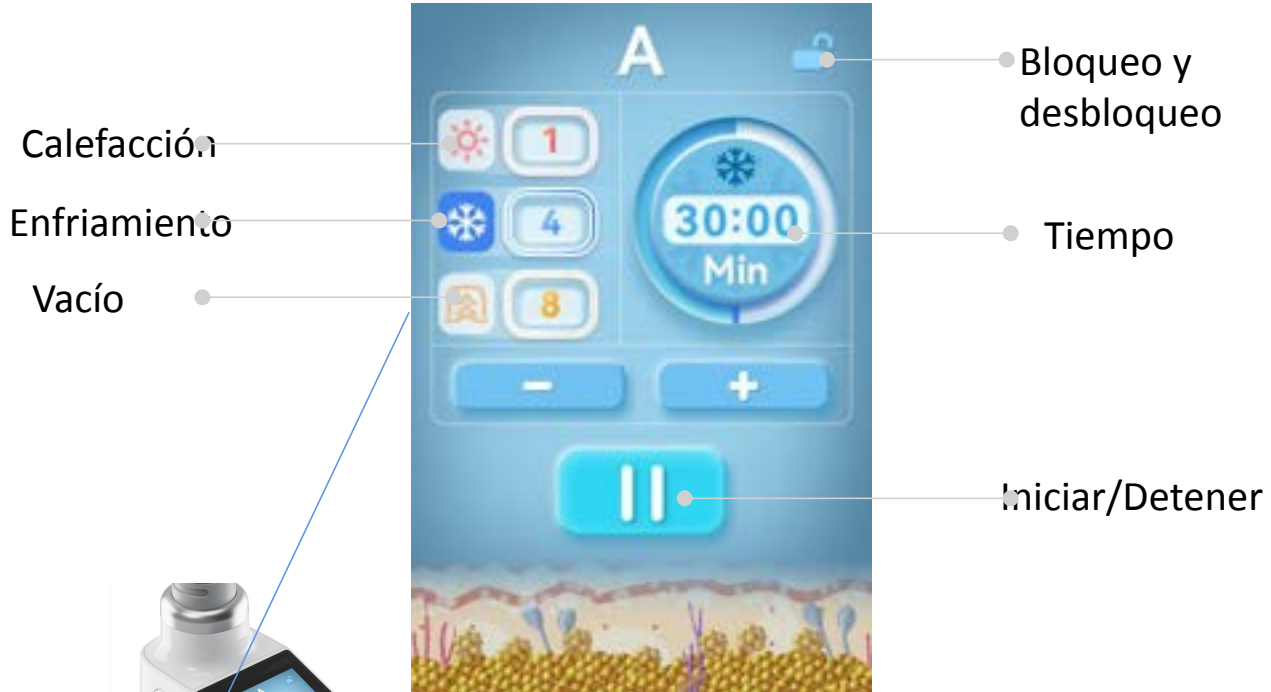

INTERFAZ DE USUARIO

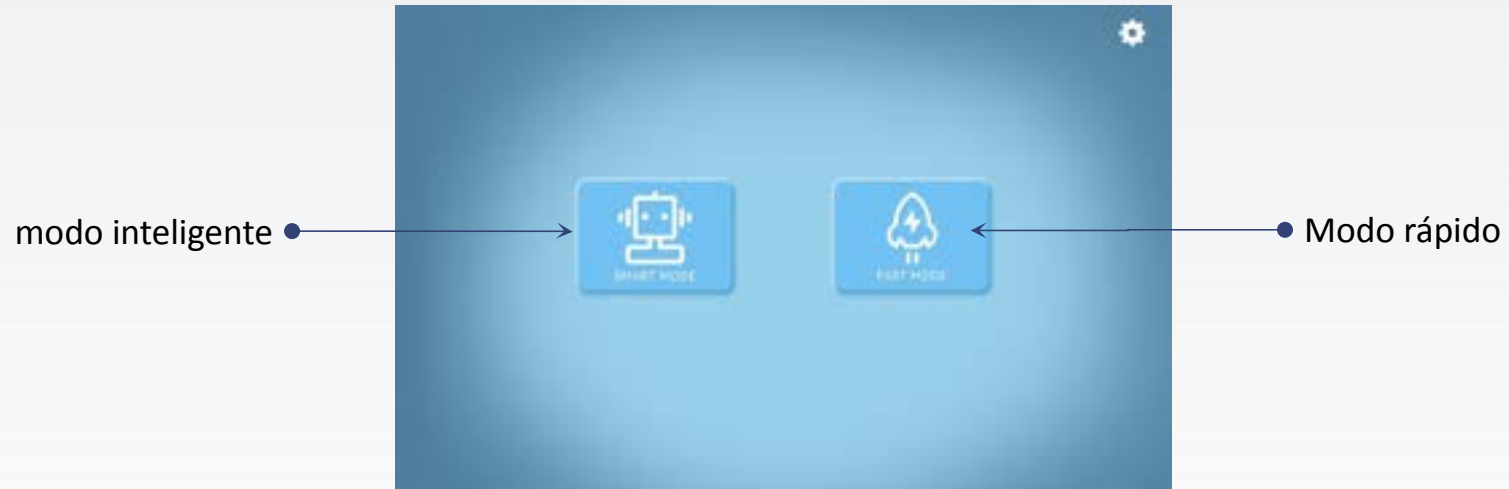

VENTAJAS **ÁNGULO DE PANTALLA AJUSTABLE**

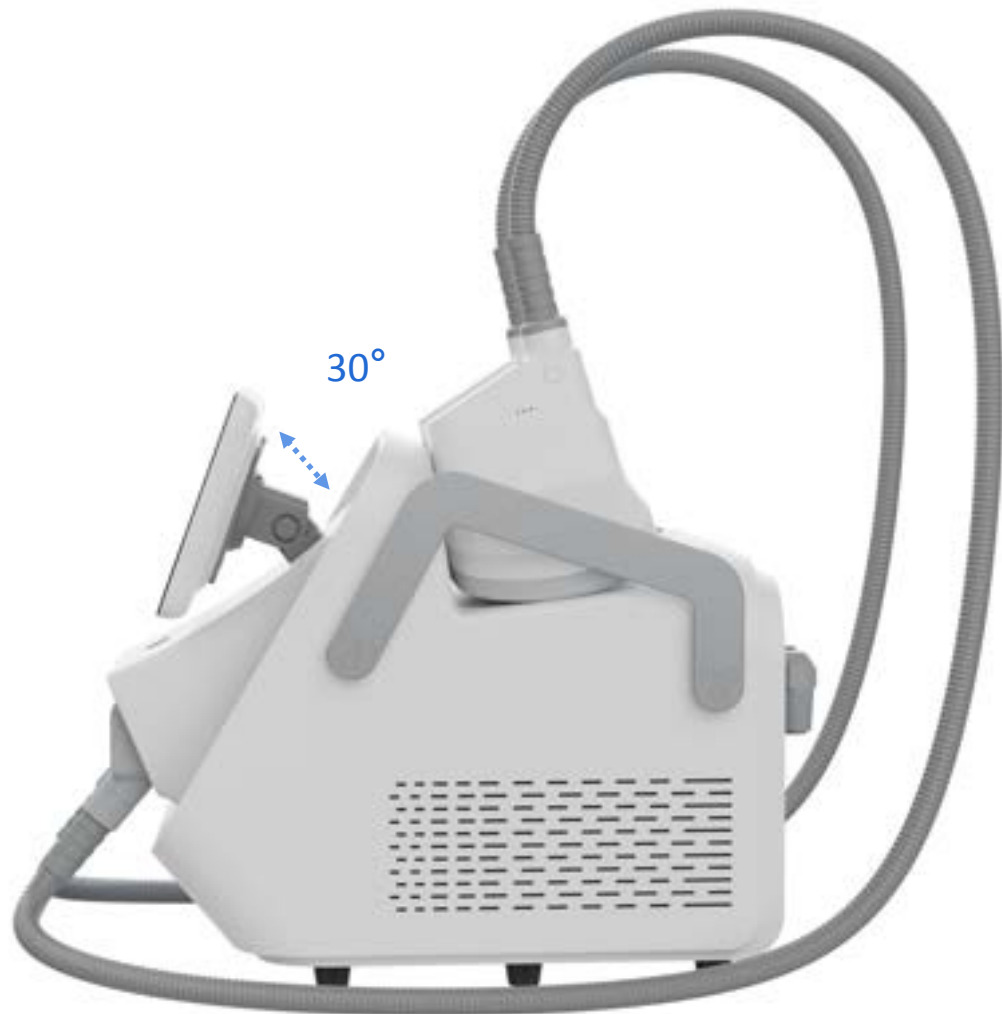

ESPECIFICACIÓN


360 CRIOLIPOLISIS CRYOCOOL

Potencia de entrada:	1200 W
Presión de cabeza congelada:	0-60Kpa
Pantalla de cabeza congelada:	-12°C -1°C
Tipo de mango de tratamiento:	5 Opcional (reemplazar aplicador)
Pantalla de la máquina:	Ángulo de pantalla ajustable de 12 pulgadas
Sistema de refrigeración:	Refrigeración de semiconductores + refrigeración por agua + refrigeración por aire
Dimensión:	42*58*52cm




ANTES & DESPUÉS


0day

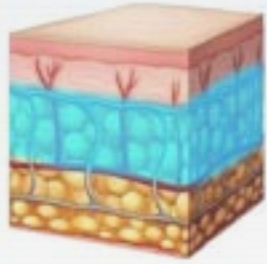

30days

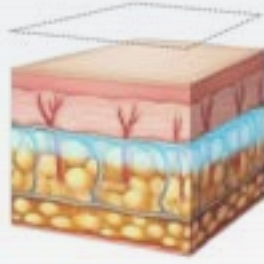

90days

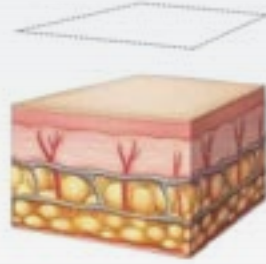

Género:femenino

Edad: 32

Área de tratamiento:
abdomen

Tiempos de tratamientos: 3



Género:femenino

Edad: 35

Área de tratamiento:
abdomen

Tiempos de tratamientos: 2



Género:femenino

Edad: 29

Área de tratamiento: muslo
Tiempos de tratamientos: 4

CRILIPÓLISIS 360° CRYOCOOL



I	SOBRE SANHE	03
II	SERIE DE LÁSER CUIDADO A LA PIEL	
	1.Láser Picosegundo(500ps)	04
	2.Láser Picosegundo(2000ps)	06
	3.Láser Picosegundo (2000ps)	08
	4.Nd Yag laser	10
	5.Nd Yag Laser	12
III	SERIE DE DEPILACIÓN	
	1.Láser depilación(2 manípulos)	14
	2.Láser depilación (2000W)	16
	3.Láser depilación (300W – 800W)	18
	4.DPL depilación	20
	5.SDPL SHR depilación+eliminación de manchas.....	22
	6.SHR IPL E-light	24
IV	SERIE ANTI ENVEJECIMIENTO	
	1.RF Microneedle Fraccional (Vacuum)	26
	2..RF Microneedle Fraccional (Sin Vacuum)	28
	3.CO2 Láser fraccional	30
	4.Hifu Facial y Corporal	32
V	SERIE DE BODY SHAPE	
	1.Sistema de Magshape para desarrollar músculos(Vertical)	34
	2.Sistema de Magshape para desarrollar músculos(Portable)	36
	3.Cryocool Criolipólisis 360°	38
VI	SERIE DE ENFRIAMIENTO	
	1.Máquina de enfriador (Grande)	40
	2Máquina de enfriador(pequeño)	42
VII	CAPILAR LÁSER CRECIMIENTO DE CABELLO	44
VIII	LOGÍSTICO Y POSTVENTA	46

SOBRE SANHE

Beijing Sanhe Beauty S&T Co., Ltd. es un fabricante profesional de dispositivos láser médicos y estéticos en China. SANHE lasers tiene su propio departamento de investigación y desarrollo, clínica, departamentos de ventas y posventa, y puede ofrecer soporte tecnológico profesional y datos clínicos a la primera. SANHE está comprometido con la investigación e innovación de la tecnología de belleza médica, brindando a los clientes equipos de belleza profesionales y servicios técnicos relacionados en los campos del tratamiento de la piel.

Con más de 10 años de desarrollo y esfuerzos, ahora tenemos más de 200 empleados en nuestra empresa y la empresa se expande a más de 100.000,00 m2 con 2 fábricas. La fábrica principal se centra en dispositivos OEM/ODM para distribuidores en el mundo, la subfábrica se centra en la producción de pedidos de grandes cantidades. En la empresa SANHE, el 20% de nuestros empleados son especialistas en I+D e ingenieros de servicio. El departamento de investigación y desarrollo y servicio siempre ha sido nuestra base principal. SANHE se centra en ofrecer productos innovadores considerados el estándar de oro en los mercados de todo el mundo, para el beneficio de todos. Estos esfuerzos nos ayudan a ganar una buena reputación en la mente de todos los clientes.

SANHE ha participado en las exposiciones internacionales todos los años. Con varios años de esfuerzo, SANHE obtuvo una serie de certificados médicos nacionales e internacionales para sus equipos, como (TUV) CE, (TUV) ISO 13485, Certificado FDA; así como el derecho de certificado de importación y exportación, Permisos para Empresas de Producción de Dispositivos Médicos y Certificado de Empresa de Alta Tecnología.

Lo que SANHE quiere hacer es ganar gloria por la belleza y la salud, contribuir a la industria de la belleza y ayudar a todas las personas en el mundo a disfrutar de una vida feliz, saludable y hermosa.

SANHE Misión:

Entregar salud y belleza al mundo.

SANHE Vision:

Proveedor de equipos médicos de belleza avanzados de clase mundial.

Valores de SANHE :

Centrarse en el cliente, centrarse en las personas
Persiga la excelencia
Honestidad y Credibilidad Apertura y Cooperación
Innovación y Emprendimiento Pasión y Felicidad





SERIE DE LÁSER CUIDADO A LA PIEL

Láser picosegundo (500ps)

Eliminación de tatuajes, eliminación de manchas, carbón peeling, rejuvenecimiento facial



Eliminar cloasma



Eliminar tatuajes



Nevus Rubí Lunares



Eliminar manchas

DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión.



Cabezal Zoom 650nm 585nm Celular Fraccional (1064&532nm)



Diferentes funciones y sugerencia de parámetros .

La densidad de energía es fácil de operar para doctores

LÁSER PICOSEGUNDO (500PS)

Potencia	2500W
Longitud de onda láser	1064nm, 532nm (650 nm y 585 nm opcionales)
Energía de salida	Single: 1064nm: 80- 800mj; 532nm: 40- 400mj
Frecuencia	1-10Hz
Tamaño del punto	Φ2-10mm
Sistema de refrigeración	Refrigeración por aire + Circulación de agua
Estándar de potencia	AC220V±10% 50Hz; AC110V±10% 60Hz
Tamaño de la máquina	95*40*185cm
Tamaño de embalaje	110*56*128cm
Peso neto	109.3kg
Peso bruto	148kg



VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

Pulso corto 500ps pueden destruir la pigmentación en muy poco tiempo.

Alta frecuencia La alta frecuencia de 1-10 HZ puede ahorrar mucho más tiempo de tratamiento.

Alta precisión El tamaño del punto ajustable de 2 a 10 mm puede ubicar el área de tratamiento de manera específica.

Corea importada El brazo de 7 articulaciones importado de Corea facilita la operación.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz. Súper Pico Tecnología Láser.

El mundo de la estética del láser ha inventado un nuevo láser con una duración de pulso corta de hasta picosegundos (una billonésima de segundo).

El ancho del pulso Ultra-shot en la piel producirá un mejor efecto, muy poco calor y un tratamiento más seguro.

Es más eficaz que el láser nd yag normal para eliminar la pigmentación, rejuvenecer la piel y eliminar tatuajes.



Antes Después



Láser normal
Picosegundo



SERIE DE LÁSER CUIDADO A LA PIEL

Láser picosegundo (2000ps)

Eliminación de tatuajes, eliminación de manchas, carbón peeling, rejuvenecimiento facial



Eliminar cloasma



Eliminar tatuajes



Nevus Rubí Lunares etc



Eliminar manchas



DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión



Cabezal Zoom 650nm 585nm Celular Fraccional (1064&532nm)



La energía se puede mostrar durante el tratamiento mediante la línea de datos. El sistema de bateo de datos puede ofrecer los datos del tratamiento recomendado.

Pulso único y doble pulso para diferentes tratamientos.

LÁSER PICOSEGUNDO (BRAZO COREA 2000PS)	
Potencia	2300W
Longitud de onda láser	1064nm, 532nm (650nm and 585nm Optional)
Energía de salida	Doble:1064nm: 1600mj; 532nm: 800mj Single: 1064nm: 800mj; 532nm: 400mj
Frecuencia	1-10Hz
Tamaño del punto	Φ2-10mm
Sistema de refrigeración	Refrigeración por aire + Circulación de agua
Estándar de potencia	AC220V±10% 50Hz; AC110V±10% 60Hz
Tamaño de la máquina	90*35*170cm
Tamaño de embalaje	107*50*130cm
Peso neto	80kg
Peso bruto	120kg



VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

Pulso corto	2000ps pueden destruir la pigmentación en muy poco tiempo.
Alta frecuencia	La alta frecuencia de 1-10 HZ puede ahorrar mucho más tiempo de tratamiento
Alta precisión	El tamaño del punto ajustable de 2 a 10 mm puede ubicar el área de tratamiento de manera específica.
Corea importada	El brazo de 7 articulaciones importado de Corea facilita la operación.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz

Súper Pico Tecnología Láser.

El mundo de la estética del láser ha inventado un nuevo láser con una duración de pulso corta de hasta picosegundos (una billonésima de segundo).

El ancho del pulso Ultra-shot en la piel producirá un mejor efecto, muy poco calor y un tratamiento más seguro.

Es más eficaz que el láser nd yag normal para eliminar la pigmentación, rejuvenecer la piel y eliminar tatuajes.





SERIE DE LÁSER CUIDADO A LA PIEL

Láser picosegundo (2000ps)

Eliminación de tatuajes, eliminación de manchas, carbón peeling, rejuvenecimiento facial



Eliminar cloasma



Eliminar tatuajes



Nevus Rubí Lunares, etc



Eliminar manchas

DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión.



532 nm puede eliminar el pigmento superficial en el área del ojo redondo, como marca de nacimiento, nevo de Ota, mancha de café, tatuajes de color rojo y lesiones vasculares, eritema lunar. Más adecuado para pieles oscuras.



1064nm puede eliminar el pigmento de la capa dérmica en la cara y el cuerpo, como marcas de nacimiento, nevos de Ota, manchas de café y tatuajes de color azul y negro.



LÁSER PICOSEGUNDO (2000PS)	
Potencia	2000W
Longitud de onda láser	1064nm, 532nm
Energía de salida	100-800mj
Frecuencia	1-20Hz
Tamaño del punto	Φ1-5mm
Sistema de refrigeración	Refrigeración por aire + Circulación de agua
Estándar de potencia	AC220V±10% 50Hz; AC110V±10% 60Hz
Tamaño de la máquina	40*55*115cm
Tamaño de embalaje	69*52*123cm
Peso neto	45kg
Peso bruto	72kg



VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

Pulso corto	22000ps pueden destruir la pigmentación en muy poco tiempo.
Alta frecuencia	La alta frecuencia de 1-20 HZ puede ahorrar tratamiento tiempo mucho más.
Alta precisión	El tamaño del punto ajustable de 1 a 5 mm puede ubicar el área de tratamiento de manera específica.
Brazo de sujeción del mango	Fácil de instalar y ahorra costos de envío.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO


El tratamiento científico es seguro y eficaz

Súper Pico Tecnología Láser

El mundo de la estética del láser ha inventado un nuevo láser con una duración de pulso corta de hasta picosegundos (una billonésima de segundo).

El ancho del pulso Ultra-shot en la piel producirá un mejor efecto, muy poco calor y un tratamiento más seguro.

Es más eficaz que el láser nd yag normal para eliminar la pigmentación, rejuvenecer la piel y eliminar tatuajes.

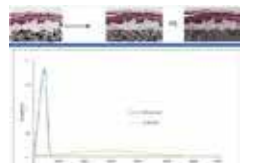



SERIE DE LÁSER CUIDADO A LA PIEL

Nd Yag láser

Eliminación de tatuajes, eliminación de manchas, carbón peeling, rejuvenecimiento facial



Eliminar cloasma



Eliminar tatuajes



Nevus Rubí Lunares, etc



Eliminar manchas

DISEÑO SEIKO

PFabricación profesional, calidad de precisión.



Cabezal Zoom 650nm 585nm Celular Fraccional (1064&532nm)



Modo single



Modo doble

LÁSER ND YAG (BRAZO DE COREA)

Potencia	1300W
Longitud de onda láser	1064nm, 532nm (650nm and 585nm Optional)
Energía de salida	Double: 1064nm: 2500mj; 532nm: 1200mj Single: 1064nm: 1500mj; 532nm: 800mj
Frecuencia	1-10Hz
Tamaño del punto	Φ2-10mm
Sistema de refrigeración	Refrigeración por aire + Circulación de agua
Estándar de potencia	AC220V±10% 50Hz; AC110V±10% 60Hz
Tamaño de la máquina	85*35*170cm
Tamaño de embalaje	107*50*118cm
Peso neto	90kg
Peso bruto	115kg



VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

- Corea importada** El brazo de 7 articulaciones importado de Corea
- Alta potencia** Fuente de alimentación de onda cuadrada de superficie plana y alta potencia.
- Multipulso** Pulso doble y single, con 2500mj de alta energía.
- Detección inteligente** Sistema de detección inteligente de densidad de energía.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz

Súper Pico Tecnología Láser

El mundo de la estética del láser ha inventado un nuevo láser con una duración de pulso corta de hasta picosegundos (una billonésima de segundo).

El ancho del pulso Ultra-shot en la piel producirá un mejor efecto, muy poco calor y un tratamiento más seguro.

Es más eficaz que el láser nd yag normal para eliminar la pigmentación, rejuvenecer la piel y eliminar tatuajes.





SERIE DE LÁSER CUIDADO A LA PIEL

Nd Yag láser

Eliminación de tatuajes, eliminación de manchas, carbón peeling, rejuvenecimiento facial



Eliminar cloasma



Eliminar tatuajes



Nevus Rubí Lunares, etc



Eliminar manchas

DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión



532nm

rojo, naranja, marrón, exfoliación más fuerte




1320nm

Hollywood peeling con carbón activo



1064nm

Negro, azul, penetración más profunda

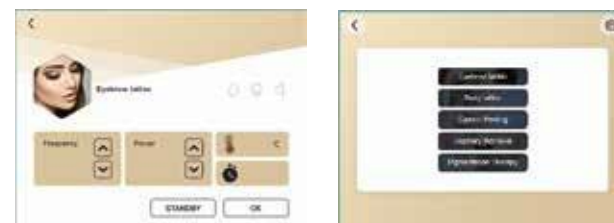

ND YAG LÁSER	
Potencia de entrada	600W
Potencia del láser	300W
Ancho de pulso	4ns
Longitud de onda láser	1064nm; 532nm
Cabezal de tratamiento	1064nm&532nm, Carbon peeling head
Frecuencia	1-10Hz
Sistema de refrigeración	Refrigeración por aire + Circulación de agua
Estándar de potencia	AC220V±10% 50Hz; AC110V±10% 60Hz
Energía	100-2000mj
Luz indicadora	650nm luz roja



VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

Corto Ancho de pulso El ancho de pulso de 4 ns puede realizar el tratamiento de forma eficaz.


Alta potencia La alta potencia de 2000 mj rompe la pigmentación en pedazos pequeños.

Alta frecuencia La alta frecuencia de 1-10 HZ ahorra tiempo de tratamiento.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz

Utilizando el efecto explosivo del láser Nd:YAG, el láser impregna la epidermis hasta la dermis, que incluye una cantidad de masa de pigmento. Dado que el láser pulsa en nanosegundos pero con una energía súper alta, la masa de pigmento inyectada se hincha rápidamente y se rompe en pequeños pedazos, que se eliminarán a través del sistema metabólico.

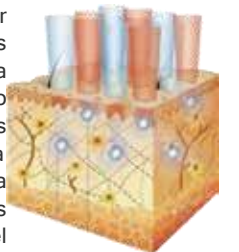



LÁSER DEPILACIÓN

Láser depilación (2 manípulos)

Mango de tratamiento separado para diferentes áreas.



Depilación Indoloro Rejuvenecimiento Todo fototipo de la piel



LONGITUD DE ONDA

1064nm+940nm+808nm+755nm

2000W

1200W

Tamaño del punto (12*23)

Tamaño del punto (12*12)



LÁSER DEPILACIÓN (2 MANÍPULOS)	
Potencia de salida del mango láser	500W/600W/800W/1200W/2000W
Potencia total	4000W
Longitud de onda	755nm,808nm,940nm,1064nm
Energía	10~80J/cm ²
Ancho de pulso	5-100MS
Pantalla	Pantalla multicolor de 12 pulgadas
Frecuencia	1~20HZ
Temperatura del cabezal	MAX -16°C
Tamaño del punto	12*23mm(800W/2000W) 12*12mm(600W/1200W)
Tamaño de embalaje	78cm*56cm*124cm
Peso bruto	90kg



VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

Súper alta potencia 2000W Plus 1200W.

Duración del pulso súper corta 5-100MS

Vida útil muy larga Los disparos son ilimitados


Súper generador láser Barras láser importada de coherent de EE.UU.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

Durante el tratamiento de depilación láser, la luz atraviesa la piel y es absorbida por la melanina del tallo piloso. Esta absorción eleva la temperatura del folículo piloso y destruye térmicamente las células responsables del nuevo crecimiento.

4 longitudes de onda pueden realizar la depilación para todo tipo de piel y depilación.

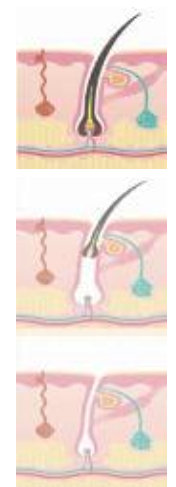



LÁSER DEPILACIÓN

Láser depilación (2000W del manípulo)

Alta potencia, corta duración de pulso, larga vida útil.



Depilación Indoloro Rejuvenecimiento Todo fototipo de la piel

DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión



2000W de alta potencia
-16 °C Enfriamiento fuerte
Sin disparos limitados
755nm+808nm+940nm+1064nm
Muestra la temperatura en tiempo real.



Modo rápido, modo normal.



Puede guardar 5 conjuntos de parámetros del cliente.

DEPILACIÓN LÁSER (MANGO 2000W)	
Potencia total	4000W (2000W), 3000W (1200W)
Potencia de salida	2000W, 1200W
Longitud de onda	755nm 808nm (940nm) 1064nm
Vida útil	Los disparos son ilimitados
Energía	10~80J/cm2
Ancho de pulso	10-100ms
Tamaño del punto	12*20mm (4000W-2000W) 12*12mm (3000W-1200W)
Frecuencia	1-20HZ (4000W-2000W) 1-10HZ (3000W-1200W)
Temperatura de cabezal	Max -16°C



(2000W)

Láser depilación

VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

Alta potencia 2000W manejan mayor potencia, más efectivo y menos dolor.

Alta frecuencia 1-20Hz de alta velocidad ahorra tiempo de tratamiento.

Enfriamiento fuerte El enfriamiento máximo de -16 °C hace que el cliente se sienta cómodo durante el tratamiento.

Larga vida útil Sin limitados disparos

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

Durante el tratamiento de depilación láser, la luz atraviesa la piel y es absorbida por la melanina del tallo piloso. Esta absorción eleva la temperatura del folículo piloso y destruye térmicamente las células responsables del nuevo crecimiento.




4 longitudes de onda pueden realizar la depilación para todo tipo de piel y depilación.



Láser depilación

Láser depilación (300W-800W)

Depilación, Mango de Alta Potencia, Indolora.

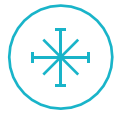

Depilación Indoloro Rejuvenecimiento Todo fototipo de la piel

DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión.

755nm: 755nm: Específico eficaz para pelos rubios, finos.

808nm: Longitud de onda estándar dorada para todo tipo de pelos.

1064nm: Específico efectivo para pieles oscuras y bronceadas.



Al adoptar el color azul y blanco, la interfaz es concisa, legible y considerada.

Según la ergonomía, la interfaz del operador está diseñada por separado para hombres y mujeres.

DEPILACIÓN LÁSER (300W - 800W)

Potencia total	2000W
Potencia de mango	300W, 600W, 800W
Longitud de onda	755nm 808nm (940nm) 1064nm
Vida útil	200.000 disparos
Energía	10~120j/cm2
Ancho de pulso	20~1200ms
Tamaño del punto	12*23mm (800W) 12*12mm (300W, 600W)
Frecuencia	1-10HZ
Temperatura de cabezal	0-5°C



(300W - 800W)

Depilación láser

VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

Tamaño de punto 12x23 mm ahorra tiempo de tratamiento.

Alta frecuencia La alta frecuencia de 1-10 HZ puede ahorrar mucho más tiempo de tratamiento.

Sistema de temperatura constante MEI interior de la máquina se mantiene siempre a 25 °C para garantizar el funcionamiento continuo.

Vida útil 200.000 disparos

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz

Durante el tratamiento de depilación láser, la luz atraviesa la piel y es absorbida por la melanina del tallo piloso. Esta absorción eleva la temperatura del folículo piloso y destruye térmicamente las células responsables del nuevo crecimiento.

4 longitudes de onda pueden realizar la depilación para todo tipo de piel y depilación






DEPILACIÓN

Depilación DPL

Lámpara alemana de espectro estrecho de 100 nm, 6 capacitancias.



Depilación

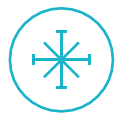

Tratamiento indoloro




Rejuvenecimiento



Todo tipo de vello

DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión.

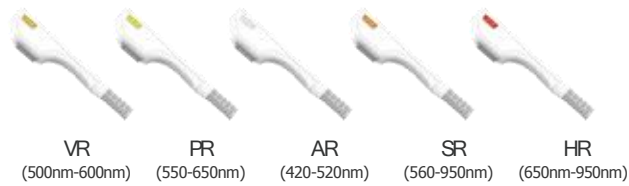

VR (500nm-600nm) PR (550-650nm) AR (420-520nm) SR (560-950nm) HR (650nm-950nm)



Logotipo de inicio, Elección de idioma, Elección del mango, Modo inteligente, Modo profesional, Modo rápido

DEPILACIÓN DPL	
Potencia total	4000W
Potencia de RF	1-30W
Longitud de onda	VR 500-600nm PR: 550-650nm Opcional (SR: 560-950nm HR:650-950nm, AR:420-520nm)
Energía	HR 5-30J/cm2 SR: 5-25J/cm2; (PR, VR, AR)
Frecuencia	HR1-8Hz SR1-3Hz(PR, VR, AR)
Conducción de energía	Zafiro puro
Lámpara	Lámpara importada alemana
Tamaño del punto	10*40mm para(SR,VR,AR,PR); 15*50mm para HR
Enfriamiento del mango	Max -10°C



Depilación DPL

VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

La luz de pulsada delicada de espectro estrecho obtiene resultados rápidos y buenos.

100 nm

Lámpara importada

Lámparas importada de Alemania, energía más estable.

Larga vida


1, 000, 000 disparos.

Multifuncional

Depilación, rejuvenecimiento de la piel, eliminación de pigmentos, eliminación de pecas, etc.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

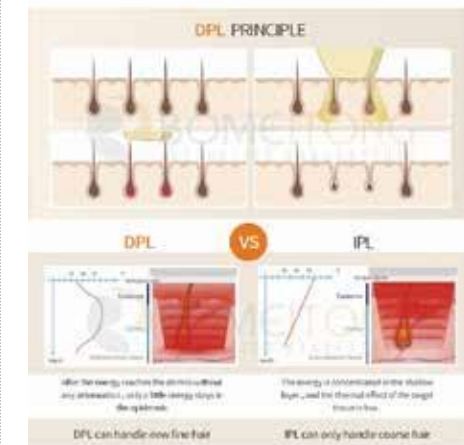




DEPILACIÓN

Depilación SDPL SHR+eliminación de pigmentos DPL

Lámpara alemana de espectro estrecho de 100 nm, 6 capacitancias.



Depilación

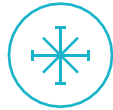

Tratamiento indoloro




Eliminación de pigmentos



Todo tipo de vello

DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión

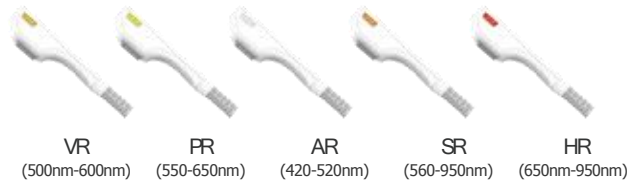

VR (500nm-600nm) PR (550-650nm) AR (420-520nm) SR (560-950nm) HR (650nm-950nm)



Logotipo de inicio, Elección de idioma, Elección del mango, Modo inteligente, Modo profesional, Modo rápido

DEPILACIÓN SDPL SHR+ELIMINACIÓN DE PIGMENTOS DPL	
Potencia total	4000W
Potencia de RF	1-30W
Longitud de onda	VR 500-600nm PR: 550-650nm Opcional SR: 560-950nm HR:650-950nm, AR:420-520nm)
Energía	HR 5-30J/cm2 SR: 5-25J/cm2; (PR, VR, AR)
Frecuencia	HR1-8Hz SR1-3Hz(PR, VR, AR)
Conducción de energía	Zafiro puro
Lámpara	Lámpara importada alemana
Tamaño del punto	10*40mm para(SR,VR,AR,PR); 15*50mm para HR
Enfriamiento del mango	Max -10°C



SDPL SHR depilación DPL eliminación de pigmentos

VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

La luz de pulsada delicada de espectro estrecho obtiene resultados rápidos y buenos.

100 nm

Lámpara importada

Lámparas importada de Alemania, energía más estable..

Larga vida

1, 000, 000 disparos

Multifuncional

Depilación, rejuvenecimiento de la piel, eliminación de pigmentos, eliminación de pecas, etc.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.






DEPILACIÓN

SHR IPL E-light

3 modos en 1, depilación, rejuvenecimiento de la piel.



Depilación

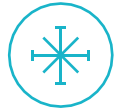

Tratamiento Rejuvenecimiento indoloro



Todo tipo de vello

DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión



Manipulador SR



Manipulador HR



Asiento del tapón del mango



Modo de pulso IPL



Modo ELight



Modo de pulso SHR



Modo SHR



Modo de pulso SHR



Modo SHR



SHR IPL E-LIGHT	
Potencia total	3000W
Potencia de RF	1-30W
Longitud de onda	HR: 650-950nm; SR: 560-950nm Opcional(VR: 420-950nm PR: 530-950nm AR:500-950nm)
Energía	IPL&E-light: 10-50J/cm ² SHR: 1-10J/cm ²
Frecuencia	IPL&E-light: ≤0.5HZ SHR: 1-8HZ SHR&SSR:1-2HZ
Conducción de energía	Zafiro puro
Lámpara	Lámpara importada del Reino Unido.
Tamaño del punto	10*40mm para(SR,VR,AR,PR); 15*50mm para HR
Enfriamiento del mango	Max -10°C



SHR IPL E-light

VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

3 en 1 Combine SHR, IPL, E-light en 1 máquina.

Lámpara importada Lámparas importadas del Reino Unido, energía más estable.

Long Life 1, 000, 000 disparos

Multifuncional Depilación, rejuvenecimiento de la piel, también disponemos de rf.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

SHR es una tecnología revolucionaria para el tratamiento de depilación IPL. La IPL tradicional trata su piel con altas cantidades de julios (energía), SHR dispara múltiples disparos pero con bajas cantidades de julios. El sistema calienta suavemente el folículo piloso y la sensación del cliente es solo calidez y una sensación de hormigueo, algunos clientes lo comparan con un cálido masaje.



El sistema también utiliza la tecnología In-Motion, donde la pieza de mano está siempre en movimiento sobre la piel.



ANTI ENVEJECIMIENTO

RF Microneedle Fraccional (Vacuum)

Microagujas y RF fraccional, motor paso a paso de Corea

longitud de aguja ajustable.



Eliminación de arrugas



Estiramiento de la piel



Blanqueamiento de la piel



Eliminación del acné



M-18

SMotor paso a paso



M-25

Control de profundidad



M-49

Oro platino



M-81

Aislado y sin aislado



INTERFAZ DE UI

Operación táctil de tamaño completo de 10,4 pulgadas, Menús deslizantes, fácil operación.



MICRONEEDLE FRACCIONAL RF (VACÍO)	
Potencia	50W max
Mango	Mango Fraccional RF, Mango RF con microaguja
Energía	1-10 niveles
Duración del pulso	10-900ms
Profundidad de la aguja	0,4 mm - 4 mm ajustable, intervalo 0,2 mm
Nivel de presión	1-4 (40Kpa, 60Kpa, 70Kpa, 85Kpa)
Modo de trabajo	SINGLE, AUTO
Modo	Monopolar, Bipolar
Tipo de aguja	Aislado, no aislado
Tamaño de cabezal microaguja	M-18, M-25, M-49, M-81
Tamaño del encabezado RF fraccional	F-3*3, F-5*5, F-9*9



(Vacuum)

RF Microneedle Fraccional

VENTAJAS TÉCNICAS


Con tecnología destacada.

- Sistema Doble** - Combine el sistema de RF con microaguja de vacío y el sistema de RF fraccionado.
- Aislado y sin aislado** - Satisfacer las diferentes necesidades de los pacientes
- Alta precisión** - Profundidad de aguja ajustable de 0,4 mm a 4 mm mediante pantalla.
- Corea importado** - Motor paso a paso importado de Corea, hace que la energía sea más estable.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

PINXEL está diseñado especialmente para entregar energía de RF directamente a la epidermis o la capa de la dermis con el fin de estimular y remodelar el colágeno de manera efectiva mediante el modo de microaguja de RF (invasivo) o el modo de matriz de RF (no invasivo).. Se puede utilizar tanto para aplicaciones epidérmicas como dérmicas en una plataforma sin cambiar ningún entorno operativo.

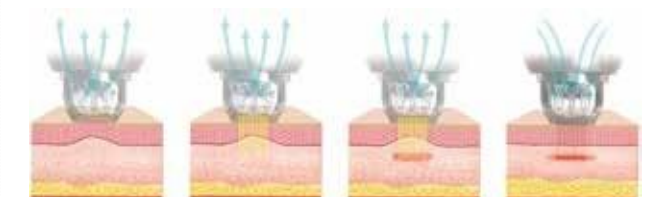



ANTI ENVEJECIMIENTO

RF Microneedle Fraccional (sin vacuum)

Microagujas y RF fraccional, motor paso a paso de Corea, longitud de aguja ajustable..



Eliminación de arrugas



Estiramiento de la piel




Blanqueamiento de la piel



Eliminación del acné

DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión

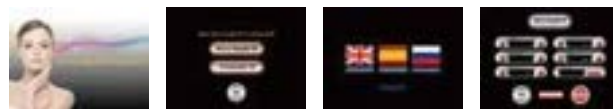

MICRONEEDLE FRACCIONAL RF (SIN VACÍO)	
Potencia	50W max
Mango	Mango Fraccional RF, Mango RF con microaguja
Energía	1-10 niveles
Duración del pulso	10-900ms
Profundidad de la aguja	0,5 mm - 3 mm ajustable, intervalo 0,5 mm
Pantalla	LCD de 10,4 pulgadas
Switch	Pedal
Modo	Monopolar, Bipolar
Enfriamiento	Max -10°C
Tipo de aguja	Aislado, no aislado
Tamaño de cabezal microaguja	25pins, 49pins
Tamaño del encabezado RF fraccional	64pins



(Sin vacuum)

RF Microneedle Fraccional

VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada

- Sistema Doble** Combine el sistema de RF con microaguja y el sistema de RF fraccionado.
- Enfriamiento fuerte** Circulación por agua, ventiladores y un cabezal de enfriamiento para tratamiento.
- Alta precisión** Longitud de aguja ajustable de 0,5-3 mm mediante pantalla.
- Corea importado** Motor paso a paso importado de Corea, hace que la energía sea más estable

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

PINXEL está diseñado especialmente para administrar energía de RF directamente a la epidermis o la capa de la dermis con el fin de estimular y remodelar el colágeno de manera efectiva mediante el modo de microaguja de RF (invasivo) o el modo de matriz de RF (no invasivo).

Se puede utilizar tanto para aplicaciones epidérmicas como para aplicaciones dérmicas en una sola plataforma sin cambiar ningún entorno operativo.





ANTI ENVEJECIMIENTO

CO2 láser fraccionado

Tubo RF metálico, Rejuvenecimiento de la piel, Tratamiento ginecológico.



Cicatriz de acné



Estiramiento vaginal



Rejuvenecimiento de piel



Eliminación de arrugas



DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión



Un mango de escaneo, un mango de corte y un mango vaginal.

LÁSER DE CO2 FRACCIONAL

Fuente láser	Tubo láser RF (Coherent America)
Modo de trabajo	Modo fraccionario Modo de onda continua (CW) Modo de pulso (único y repetido)
	Ultra Pulse Mode
Longitud de onda láser	10600nm
Potencia del generador láser.	Max 60W
Potencia de salida	1-30W
Haz de apuntamiento	Láser de diodo rojo (650 nm, ≤5 mW)
Sistema de entrega	Brazo de resorte de articulación de 7 articulaciones
Área de escaneo	Máximo 20X20mm
Forma de escaneo	Elipse, rectangular, triangular, línea, cuadrado, hexágono
Sistema de extracción de humo	Soplo de aire incorporado
Sistema de refrigeración	Sistema de refrigeración ventiladores

CO2 láser fraccionado



VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada

3 cabezales de tratamiento Cabezal de corte, cabezal de escaneo, cabezal vaginal 3 en 1.

Múltiples formas Diferentes formas para diferentes áreas de tratamiento..


Importado de Estados Unidos. El tubo rf de metal importado de EE. UU. hace que la energía sea más estable.

Multifuncional Esta máquina puede rejuvenecer la piel, eliminar cicatrices y reafirmar la vagina.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

El rejuvenecimiento fraccionado es una nueva modalidad de tratamiento con láser que crea numerosas zonas microscópicas de lesión térmica de ancho, profundidad y densidad controladas que están rodeadas por un reservorio de tejido epidérmico y dérmico preservado, lo que permite una reparación rápida de la lesión térmica inducida por láser.

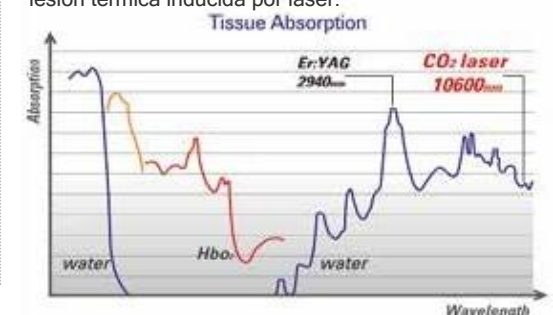



ANTI ENVEJECIMIENTO

HIFU Lifting facial

Lifting facial, eliminación de arrugas, estiramiento de la piel.



Levantamiento facial



Estiramiento de la piel



Tratamiento facial V



DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión



Cara 1,5 mm



Cara 3,0 mm



Cara 4,5 mm



Cuerpo 8mm



Cuerpo 13mm

Cartuchos de cara: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
Cartuchos de cuerpo: 8 mm, 13 mm

HIFU LIFTING FACIAL

Tipo	Ultrasonido focalizado de alta intensidad
Frecuencia	4MHz
Potencia	200W
Profundidad del tratamiento	DS4-1.5 DS4-3.0 DS4-4.5 (DS4-8.0 DS4-13.0 optional)
Longitud del tratamiento	DS4-1.5: 5----15mm DS-3.0/DS-4.5: 5----25mm
Energía	0.1---2.0j
Disparos de cartuchos	10000 disparos
Fuente de alimentación	AC 110V~220V~50Hz/60Hz
Tamaño de la máquina	50*37*35cm
Peso de la máquina	9.0kg
Tamaño de embalaje	52*44*46cm
Peso del embalaje	12kg



HIFU Lifting facial

VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada

Sin tiempo de inactividad Sin sangrado, tratamiento no invasivo.

Resultado duradero Un tratamiento puede garantizar resultados de 2 a 3 años.

Tiempo de operación rápido El tratamiento completo de rostro y cuello sólo dura entre 40 y 60 minutos.


Tratamiento flexible Un solo tratamiento logra resultados instantáneos.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

HIFU se administra en la piel profunda y causa coagulación térmica al SMAS (Sistema Aponeurótico Muscular Superficial).

Puede proporcionar a la piel un estiramiento y rejuvenecimiento gradualmente con el tiempo.

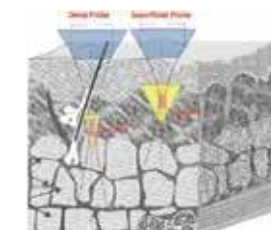



BODY SHAPING

Sistema de construcción muscular Magshape

7 Tesla, 3 modos de trabajo, 100 HZ.

(Vertical)



Desarrollo muscular



Forma del cuerpo



Quemar grasa

DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión.



3 tipos de manipuladores opcionales. Frecuencia de 100 HZ para cada uno. Mango de brazos y mango de ginecología Opcional.



SISTEMA DE DESARROLLO MUSCULAR MAGSHAPE (VERTICAL)	
Potencia	4300 W
Onda magnética (energía)	0-7 Tesla
Frecuencia	F1:1-10Hz F2:1-100Hz
Ancho de pulso	300us
Modo de trabajo	Modelo-I (modo deportivo) Modelo II (modo suave) Modelo-III (modo profesional)
Mango de tratamiento	4 mangos
Estándar de potencia	AC220V±10% 50Hz; AC110V±10% 60Hz
Tamaño de la máquina	120*41*77cm
Tamaño de embalaje	95*60*127cm
Peso neto	95kg
Peso bruto	125kg



(Vertical)

Sistema de construcción muscular Magshape

VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

- 7 Tesla** La gran potencia de 7 Tesla garantiza un mejor resultado.
- 100HZ** La alta frecuencia de 100 HZ fortalece los músculos.
- 3 Modos de trabajo** 3 modos de tratamiento pueden satisfacer diferentes demandas.
- 4 manipuladores** 2 manipuladores para el abdomen y 2 manipuladores para los brazos

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

El campo electromagnético de alta densidad-EMT puede apuntar a las células nerviosas motoras para generar un potencial de acción, que estimula directamente la contracción muscular. Se puede decir que "puedes hacer ejercicio mientras estás acostado". Durante el tratamiento de 30 minutos, los músculos se contraen 30.000 veces con Alta frecuencia y alta intensidad, que no se pueden lograr con el ejercicio general. La contracción extrema requiere una gran cantidad de suministro de energía, por lo que las células adyacentes al músculo también se consumen, lo que lleva a la apoptosis natural y reduce el espesor de la grasa de manera efectiva.





BODY SHAPING

Sistema de construcción muscular Magshape

(Portable)



Desarrollo muscular



Forma del cuerpo



Quemar grasa



DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión.



3 tipos de manipuladores opcionales. Frecuencia de 100 HZ para cada uno. Mango de brazos y mango de ginecología Opcional.

SISTEMA DE DESARROLLO MUSCULAR MAGSHAPE(PORTABLE)	
Potencia	2600W
Onda magnética (energía)	0-7 Tesla
Frecuencia	F1:1-10Hz F2:1-100Hz
Ancho de pulso	300us
Modo de trabajo	Modelo-I (modo deportivo) Modelo II (modo suave) Modelo-III (modo profesional)
Mango de tratamiento	2 mangos
Estándar de potencia	AC220V±10% 50Hz; AC110V±10% 60Hz
Tamaño de la máquina	49*50*139cm/34*50*41cm
Tamaño de embalaje	78*56*124cm/81*45*51cm
Peso neto	69kg/93kg
Peso bruto	30kg/47kg



(Portable)

Sistema de construcción muscular Magshape

VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

- 7 teslas** La gran potencia de Tesla garantiza un mejor resultado.
- 100HZ** La alta frecuencia de 100 HZ fortalece los músculos.
- 3 modos de trabajo** 3 modos de tratamiento pueden satisfacer diferentes demandas.
- 4 manipuladores** 2 manipuladores de abdomen y 2 manipuladores de brazo

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

El campo electromagnético de alta densidad-EMT puede apuntar a las células nerviosas motoras para generar un potencial de acción, que estimula directamente la contracción muscular. Se puede decir que "puedes hacer ejercicio mientras estás acostado". Durante el tratamiento de 30 minutos, los músculos se contraen 30.000 veces con Alta frecuencia y alta intensidad, que no se pueden lograr con el ejercicio general. La contracción extrema requiere una gran cantidad de suministro de energía, por lo que las células adyacentes al músculo también se consumen, lo que lleva a la apoptosis natural y reduce el espesor de la grasa de manera efectiva.





BODY SHAPING

360 criolipólisis cryocool

Elimine la grasa rebelde del abdomen, muslos, espalda, parte superior de los brazos y senos auxiliares. 5 aplicadores reemplazables para todo el cuerpo / -15°C / 3 minutos de calentamiento.



Pérdida de grasa



Adelgazamiento Corporal



Darle forma al cuerpo



DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión.

La pantalla de 3,5 pulgadas muestra la temperatura, el vacío, el tiempo, el inicio y la parada.

Reemplace el cabezal de tratamiento para tratar diferentes áreas, de manera conveniente y eficiente.



76*36*27mm



143*60*52mm



153*56*81mm



144*143*76mm



204*73*81mm

360 CRIOPOLÍISIS CRIOCOOL	
Potencia total	1200W
Presión de cabeza congelada:	0-100Kpa
Enfriamiento	-15°C -5°C
Tipo de mango de tratamiento:	5 aplicadores opcionales
Pantalla de la máquina:	Pantalla plegable de 15,6 pulgadas, ajustable de 30°-73°.
Sistema de refrigeración:	Refrigeración de semiconductores + circulación de agua + refrigeración por ventiladores
Dimensión:	41*58*154cm

360 Cryolipolysis Cryocool



VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

Trabajar eficientemente 360° 4 Manípulos trabajando eficientemente al mismo tiempo.

-15°C 360° 4 Manípulos trabajando eficientemente al mismo tiempo.

Comodidad del tratamiento Aplicador de tratamiento de silicona médica, tratamiento más cómodo.

Más área de tratamiento Papada y parte posterior de los muslos.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

Después de que el tejido adiposo del sitio de cuidado objetivo es succionado por la sonda de enfriamiento, la sonda de enfriamiento libera energía de enfriamiento circundante de 360 grados para actuar sobre las células grasas sin dañar ningún tejido circundante. La energía de enfriamiento constante y potente de Cryocool activa una célula natural. proceso de muerte llamado "apoptosis", después del cual las células grasas apoptóticas se excretan a través del proceso metabólico natural del cuerpo. Las células grasas específicas de Cryocool se eliminan permanentemente del cuerpo, lo que resulta en una pérdida significativa de grasa en el área de tratamiento.






SERIE DE ENFRIAMIENTO

Máquina de enfriador (grande)

Cómodo, mejor compañero, alivia el dolor.



Aliviar el dolor

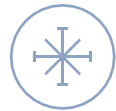

Enfriamiento Socio láser de la piel



DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión.



Adaptador redondo pequeño



Adaptador cuadrado medio



Adaptador cuadrado grande



Velocidad del viento: 6 niveles
visualización de temperatura: -4 °C ~ -30 °C Ajustable

ENFRIAMIENTO DE AIRE DE PIEL

Producto	Dispositivo de aire frío ICool
Sistema de control	Pantalla táctil a color de 5,2 pulgadas
Fotencia	1500W
Rango de temperatura	-4°C ~ -30°C
velocidad del viento	1-6 grados
Temporizador de descongelación	15S
Longitud del tubo de tratamiento	2.5m
Tamaño de la máquina	75*40*100cm
Tamaño de embalaje	91*53*108cm
Peso neto	68kg
Peso bruto	100kg



(Big)

Skin Air Cooling

VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

Compresor Marca Alemania - SECOP.

Súper enfriamiento -4 °C ~ -30 °C Temperatura de enfriamiento.



6 niveles Viento de 6 niveles ajustable.

Inteligente Tiempo de descongelación automática 15S.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

Después de insertar el conjunto del conector, el I-Cool podría funcionar con una máquina de depilación láser de diodo de 808 nm, una máquina láser fraccional de CO2, una máquina SHR, una máquina IPL y una máquina láser Nd Yag... Adecuado para todas las máquinas si los pacientes sienten dolor y necesitan un procedimiento de enfriamiento. .

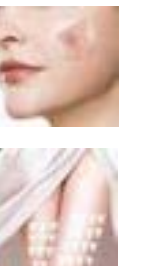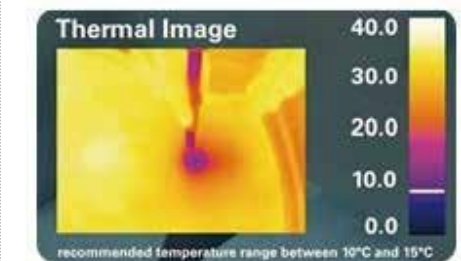




SERIE DE ENFRIAMIENTO

Máquina de enfriador

Cómodo, mejor compañero, alivia el dolor.



Aliviar el dolor

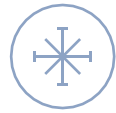

Enfriamiento de la piel



Socio láser

DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión



Adaptador redondo pequeño



Adaptador cuadrado medio



Adaptador cuadrado grande



Velocidad del viento: 6 niveles
visualización de temperatura: -4 °C ~ -30 °C Ajustable

ENFRIAMIENTO DE AIRE DE PIEL

Producto	Dispositivo de aire frío ICool
Sistema de control	Pantalla multicolor de 2,4 pulgadas
Fotencia	1000W
Rango de temperatura	-4°C ~ -30°C
velocidad del viento	1- 6 niveles
Temporizador de descongelación	15S
Longitud del tubo de tratamiento	2.5m
Tamaño de la máquina	61*35*100cm
Tamaño de embalaje	82*50*93cm
Peso neto	68kg
Peso bruto	80kg



VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

Compresor Marca Alemania - SECOP.

Súper enfriamiento -4 °C ~ -30 °C Temperatura de enfriamiento.



6 niveles Viento de 6 niveles ajustabl

Inteligente Tiempo de descongelación automática 15S.

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

Después de insertar el conjunto del conector, el I-Cool podría funcionar con una máquina de depilación láser de diodo de 808 nm, una máquina láser fraccional de CO2, una máquina SHR, una máquina IPL y una máquina láser Nd Yag... Adecuado para todas las máquinas si los pacientes sienten dolor y necesitan un procedimiento de enfriamiento. .

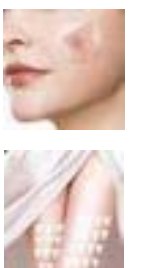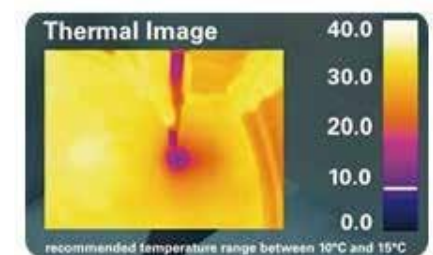



HAIR GROWTH

CAPILAR LÁSER CRECIMIENTO DE CABELLO

Láser japonés, analizador de cabello, pulverizador de medicamentos.



Recrecimiento del cabello



Cuidado del cuero cabelludo



Analizador de cabello



DISEÑO SEIKO

Fabricación profesional, calidad de precisión.

01· Analizador de cabello y piel

Analice el folículo piloso y el cabello. Guarde la fecha de tratamiento de los pacientes. Antes y después, siga el resultado.

02· Pluma pulverizadora de oxígeno

La pluma rociadora de oxígeno puede generar un aerosol salino mediante el flujo de aire generado por la máquina Hair Regrowth Therapy y realizar un tratamiento simple de limpieza y desinfección en el cuero cabelludo.

03· Pulverizador de medicamentos

Rocíe una solución para el cuidado del cabello como una solución de Minoxidil en los folículos pilosos después de limpiar el cuero cabelludo, antes del tratamiento.

04· Peine Masajeador Microcorriente

La microcorriente generada por los electrodos puede acelerar el vaso abierto en el cuero cabelludo.

CAPILAR LÁSER CRECCIMIENTO DE CABELLO	
Potencia de salida del láser	láser de diodo de 650 nm Láser infrarrojo de 808 nm
Potencia de salida del LED	630 nm Luz fría roja 460 nm Luz fría azul 580 nm Luz fría amarilla
Tiempo de tratamiento	0-60min
Rango de tiempo pulsante	1-10s
Rango de retardo de pulsación	0-10s
Potencia de entrada	200w
Pantalla LCD	Pantalla táctil multicolor de 8 pulgadas
Tensión de entrada nominal	AC230 10%, 50Hz 1Hz AC110V 10%, 60Hz 1Hz (opcional)



Crecimiento del cabello

VENTAJAS TÉCNICAS

Con tecnología destacada.

Luces importadas Luces láser japonesas importadas..

Máquina estable 8000 horas de brillo.

Repuestos profesionales El analizador de cabello, el bolígrafo pulverizador, el bolígrafo medicinal y el peine de masaje funcionan juntos.


Múltiple Hay 3 luces LED y 2 luces láser

TEORÍA DEL TRATAMIENTO

El tratamiento científico es seguro y eficaz.

La serie de crecimiento del cabello acelera la circulación sanguínea para mejorar la capacidad de regeneración de las fibras de colágeno y promover el metabolismo.

Regular las secreciones de aceite. Promover la salud del cuero cabelludo, mejorar la calidad del cabello. Promover la absorción

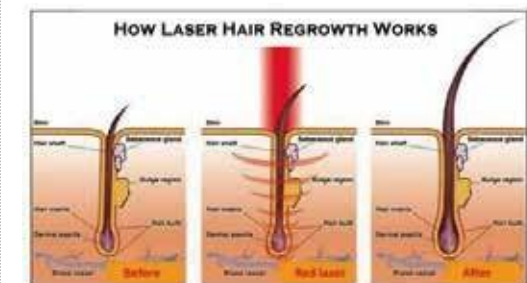

LOGÍSTICA Y POSTVENTA

SERVICIO

Nuestra empresa ha establecido relaciones de cooperación a largo plazo con DHL, TNT, EMS, etc., y le brindaremos servicios de entrega rápidos y seguros. Al mismo tiempo, el exterior de la máquina está empaquetado con una esponja personalizada y luego con metal. Se utilizan cajas de embalaje, cartones o cajas de madera para garantizar la seguridad de la máquina durante el transporte.

Para el servicio postventa, contamos con un departamento de servicio postventa profesional. Cuando la máquina encuentre un problema, le responderemos en 12 horas y la solucionaremos lo antes posible. ¡Ofreceremos el mejor servicio para los clientes!

DEPARTAMENTO POSTVENTA

Brindar soporte para la operación de la máquina, resolver problemas, realizar actualizaciones y capacitación para la máquina.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INGENIERÍA

su departamento principalmente para el mantenimiento de la máquina.

Como:

Pruebe y repare la máquina; dé la respuesta en 24 horas;

Ofrecer el repuesto de la máquina.

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

Mantenemos una cooperación a largo plazo con DHL, TNT y EMS, etc.



HIDL-MIX-1200

Sistema de depilación láser de diodo de alta intensidad



The image features a white, handheld medical device, the HIDL-MIX-1200, shown from a side profile on the left and a front view on the right. The device has a black control panel with a red emergency stop button and two yellow buttons. A grey handle is attached to the side. The background is white with faint, stylized outlines of the device and a person's face. The product name 'HIDL-MIX-1200' is prominently displayed in the center.

HIDL-MIX-1200

1200W / 10-100MS / No limitation de los disparos

Super Alta potencia

Super larga vida útil

Super cortoDuración de pulso



Introducción

Ventaja del cabezal

Interfaz de usuario

Especificaciones

Ventaja tecnológica

Operación

Antes & Después



Introducción


Pantalla táctil multicolor de 10.4 pulgadas



1200W mango de tratamiento




ABS Caja de material

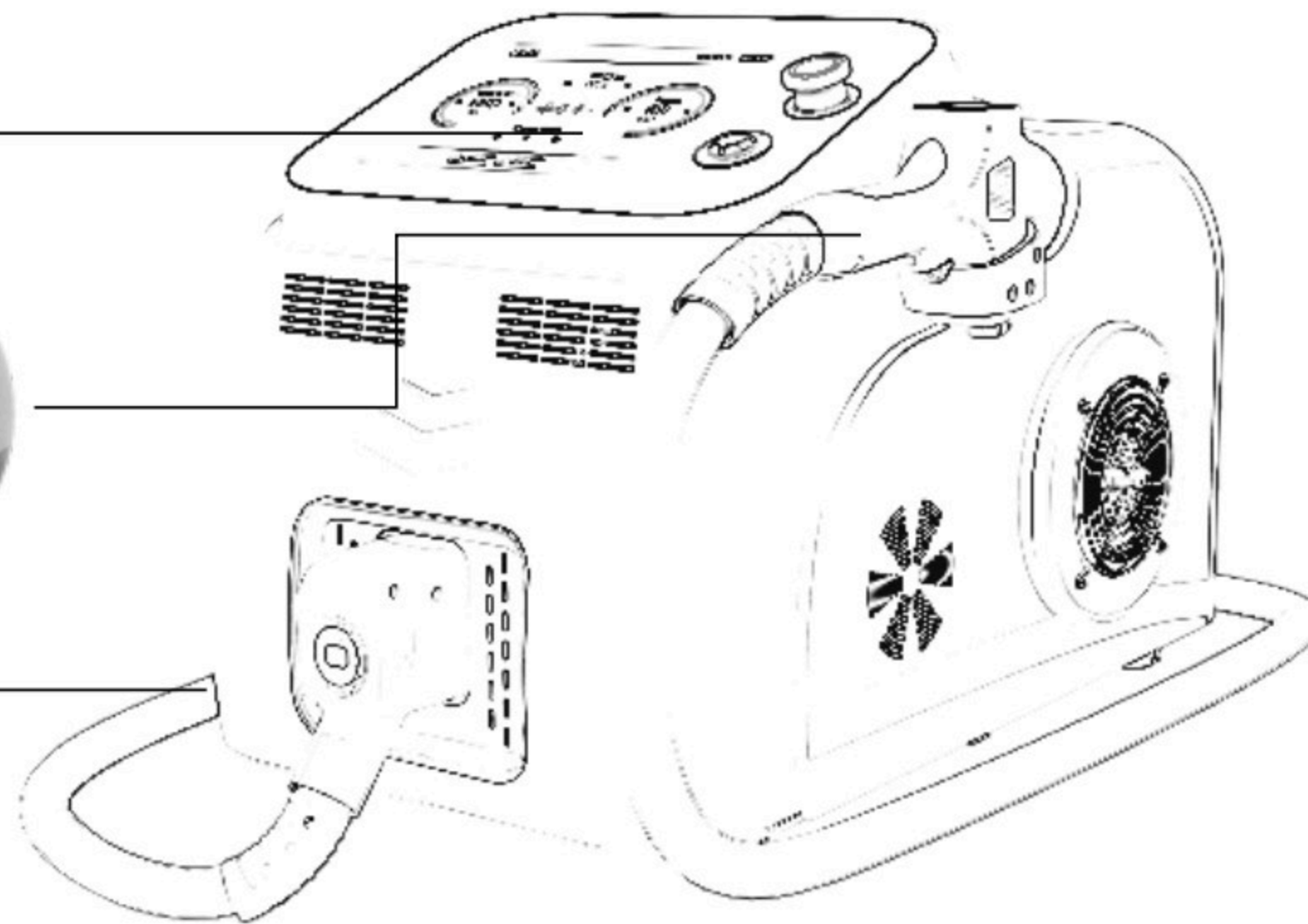

Ventaja del cabezal

Tamaño del punto: 12mm*12mm

Botón de silicona segura

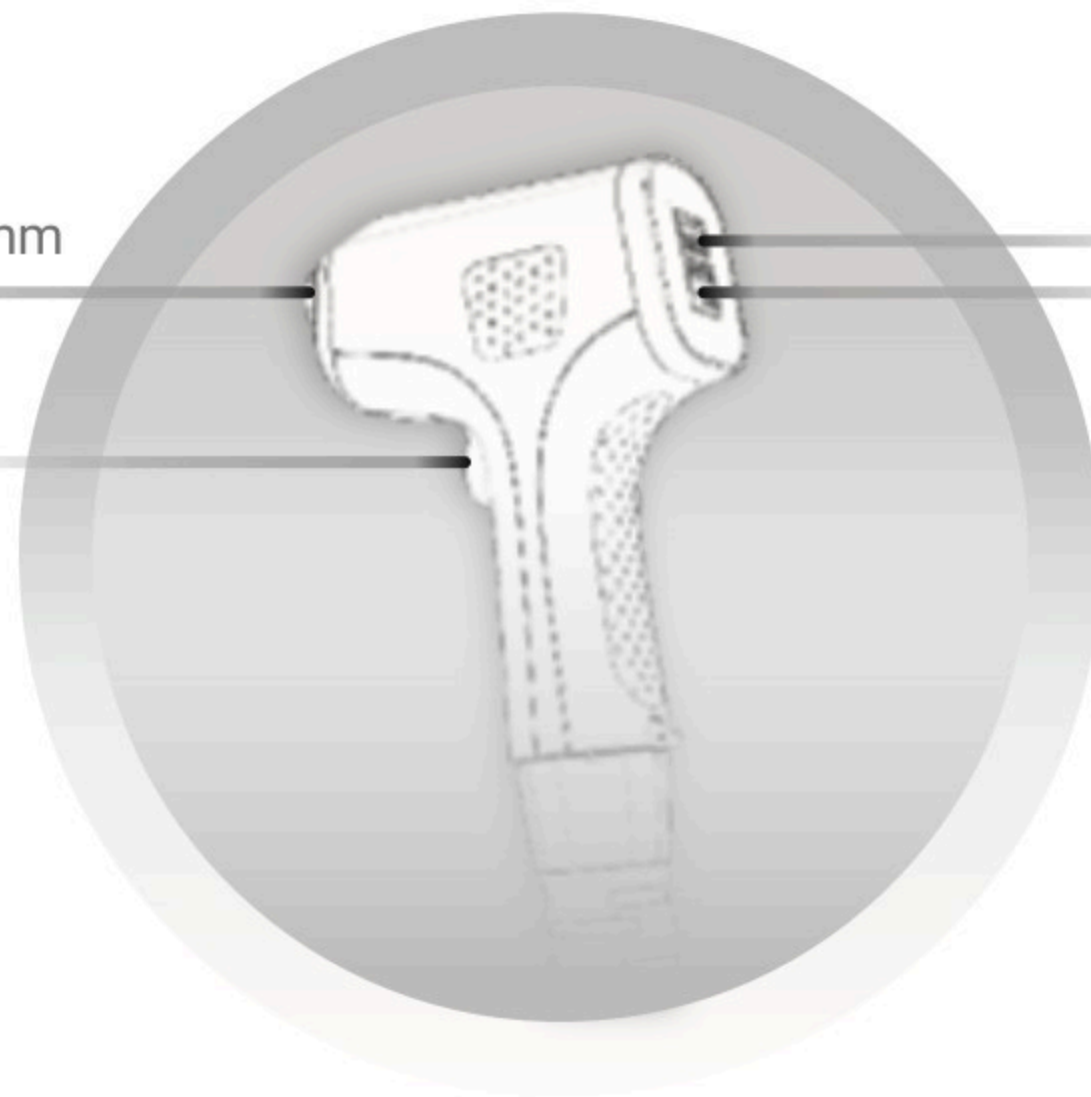

Fluencia: 10-80 J / cm²

Temperatura del cabezal de tratamiento: Max -16 °C

Potencia de salida: 1200W (100W por barra)

Barras: barra láser importada de EE. UU.

1200W de potencia máxima con láser

Disparos sin limitación.


Ventaja del cabezal



0.91kg



0.43kg

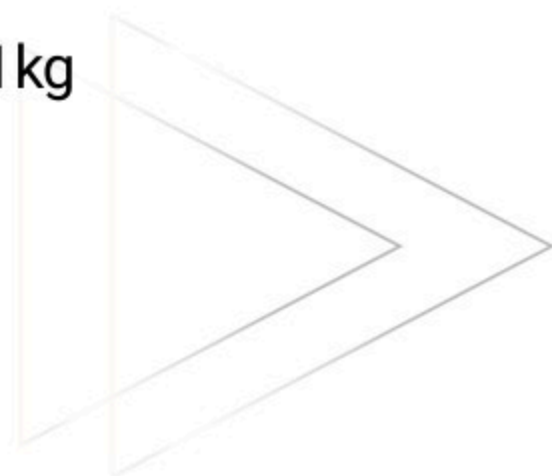

Ventaja del cabezal

Ventaja del cabezal

Aviso:

Encienda la máquina y prepárese por 5 minutos.



Interfaz de usuario

Duración del pulso: 10-100ms,

Frecuencia : 1-10Hz

Fluencia: 10-80J/cm2

Fodotipo de piel: I-VI



Modo normal

Características del sistema: adecuado para todo tipo de piel, puede ser operado directamente

Duración del pulso: 10-100ms

Frecuencia (PRE RATE): 1-10Hz

Fluencia: 10-80J/cm2


Modo memoria: I-V



Modo rápido

Características del sistema: puede guardar cinco conjuntos de parámetros de tratamiento para clientes importantes, tratamiento rápido y depilación

Interfaz de usuario

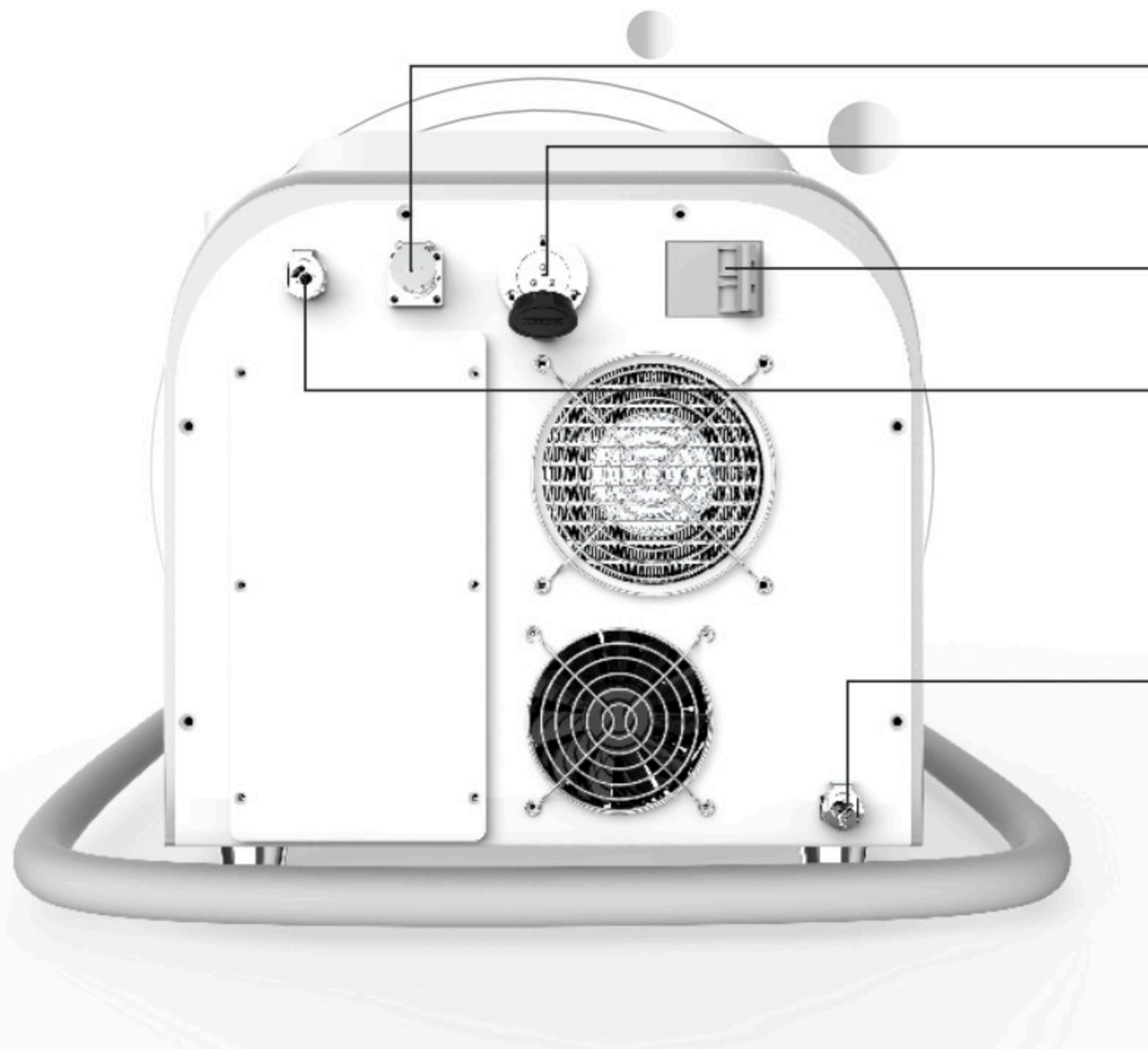

Interruptor de pie

110/220V Enchufe de aviación

Interruptor anti desbordamiento

Flujo de aire

Water Input

Water output



Actualizar enchufe

USED

Conector hembra



Conector



Ventajas:

El enchufe viejo es difícil de instalar para las mujeres.

El nuevo tipo adopta una varilla de tornillo para girar e instalar, ahorrando instalación y sin mal contacto.

Nuevo estilo

Conector hembra



Conector



Perilla de refuerzo



Especificaciones

Lasers tipo	Diodo láser de alta intensidad
Potencia de salida del mango láser	1200W
Total Potencia	4200W
Longitud de onda	755+808+940+1064nm
Disparos	100 millones disparos
Fluencia	10~80J/cm ²
Ancho de pulso	10-100ms
Tamaño de punto	12mm*12mm
Frecuencia	1~10Hz
Temperatura del cabezal de tratamiento	Max -16 °C
Sistema de refrigeración	Constant temperature refrigeration 25
Monitor	10.4 Inch multi color screen
Tamaño del paquete	62*40*40CM
Peso	30Kg



Ventaja tecnológica

- La barra láser coherente importada de EE. UU. Es más estable. Y la energía láser de salida de alta potencia de 1200 W puede lograr la mejor depilación.
- Baja inversión y alto rendimiento. El cabezal de tratamiento está garantizado por 2 años sin limitación.
- El módulo de refrigeración a temperatura constante mantiene la temperatura del agua a unos 20-25 grados, lo que puede garantizar que el sistema funcione continuamente durante 48 horas sin parar stop
- Usando la tecnología avanzada de enfriamiento por contacto con TEC y zafiro, la temperatura terminal se controla por debajo de 5 ° C, y la piel se enfría adecuadamente durante el proceso de eliminación del vello, al tiempo que garantiza la posibilidad de cero congelación.
- La frecuencia alcanza 10hz, el tratamiento es más rápido.
- El láser de longitud de onda de 808 nm apuntó a la destrucción de los pigmentos del folículo piloso.



Ventaja tecnológica

- Duración de pulso de 10-100 m para garantizar la destrucción sin dolor de los folículos capilares
- El láser de diodo destruye permanentemente los folículos pilosos, y el cabello restante será muy pequeño sin afectar la apariencia.
- La pantalla de visualización del cabezal de tratamiento muestra la temperatura de enfriamiento en consecuencia, lo que hace que la operación sea más conveniente.
- Mango súper ligero para reducir la dificultad del trabajo del operador y aumentar el valor de la experiencia.
- El modo normal y el modo rápido son opcionales, la depilación rápida también puede guardar 5 parámetros de uso común, conveniente y rápido
- Conector de refuerzo en espiral, puede insertar el cabezal de tratamiento fácilmente



Ventaja tecnológica

Trata todos los colores de cabello, desde cabello negro hasta

cabello claro

Trata todo tipo de piel, desde la piel blanca hasta la oscura.

Sin dolor; sesiones cortas de tratamiento

Tratamiento efectivo y seguro para la depilación permanente



Ventaja tecnológica

01

Afeitarse el cabello del área de tratamiento (retener 1-2 mm)



02

Limpiar el área de tratamiento.



03

Aplicar gel frío



04

El operador se pone gafas



Ventaja tecnológica

05

Los clientes ponen en Eyegoogle



06

Ajuste los parámetros para el tratamiento.



07




Después del tratamiento, limpie el sitio de tratamiento para evitar la foliculitis.



08

Limpiar el cabezal de tratamiento.



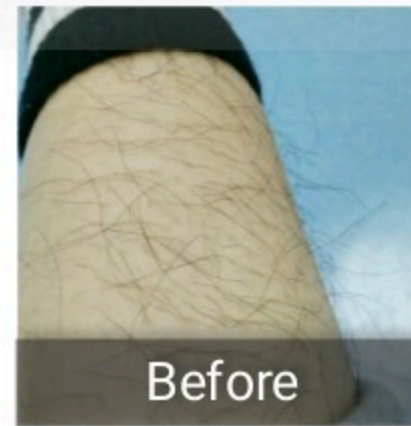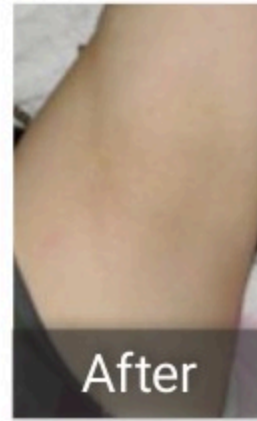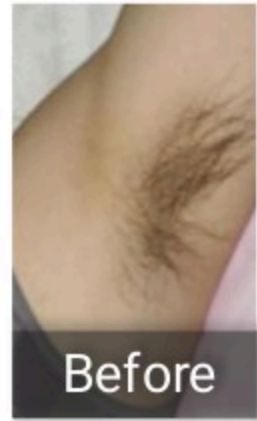

Before - After

A white laser hair removal device with a black control panel at the top. The panel features a small screen displaying a woman's face and the text "LOADING PLEASE WAIT". To the right of the screen are three buttons: a red one at the top, and two yellow ones below it. A white handpiece is attached to the right side of the device. A grey cable with a connector is plugged into the front of the device. The background is white with faint concentric circles on either side.

HIDL-MIX-1200

Sistema de depilación láser de diodo de alta intensidad

The image shows a white laser device, the HIDL-MIX-1200, with a handheld applicator. The device has a control panel on top with a red button and a yellow button. A screen on the right side displays a close-up of a person's face. The background is white with faint circular lines.

HIDL-MIX-1200

1200W / 10-100MS / No limitation de los disparos

Super Alta potencia

Super larga vida útil

Super corto Duración de pulso



Introducción

Ventaja del cabezal

Interfaz de usuario

Especificaciones

Ventaja tecnológica

Operación

Antes & Después



Introducción


Pantalla táctil multicolor de 10.4 pulgadas



1200W mango de tratamiento




ABS Caja de material

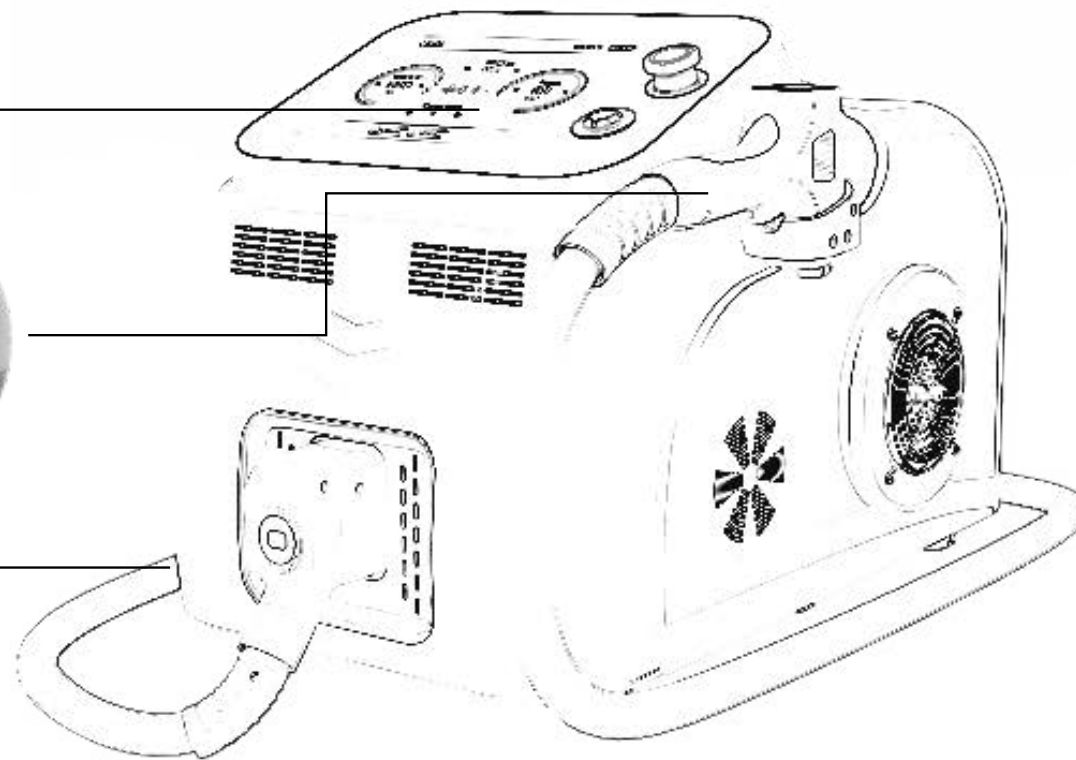

Ventaja del cabezal

Tamaño del punto: 12mm*12mm

Botón de silicona segura

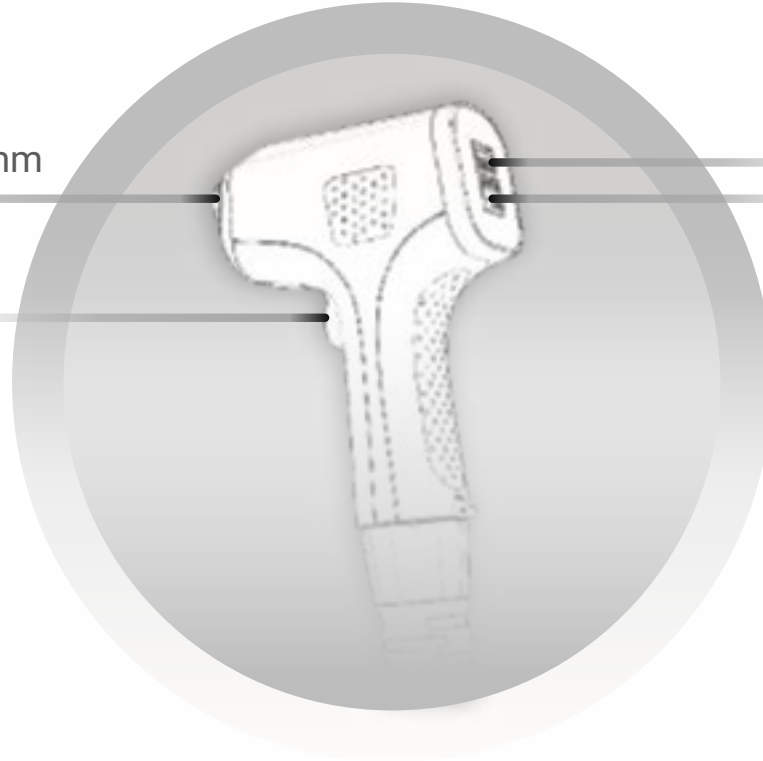

Fluencia: 10-80 J / cm²

Temperatura del cabezal de tratamiento: Max -16 °C

Potencia de salida: 1200W (100W por barra)

Barras: barra láser importada de EE. UU.

1200W de potencia máxima con láser

Disparos sin limitación.

Ventaja del cabezal



0.91kg



NEW

0.43kg



Ventaja del cabezal

Ventaja del cabezal

Aviso:

Encienda la máquina y
prepárese por 5 minutos.



Interfaz de usuario

Duración del pulso: 10-100ms,

Frecuencia : 1-10Hz

Fluencia: 10-80J/cm²

Fodotipo de piel: I-VI



Modo normal

Características del sistema: adecuado para todo tipo de piel, puede ser operado directamente

Duración del pulso: 10-100ms

Frecuencia (PRE RATE): 1-10Hz

Fluencia: 10-80J/cm²


Modo memoria: I-V



Modo rápido

Características del sistema: puede guardar cinco conjuntos de parámetros de tratamiento para clientes importantes, tratamiento rápido y depilación

Interfaz de usuario

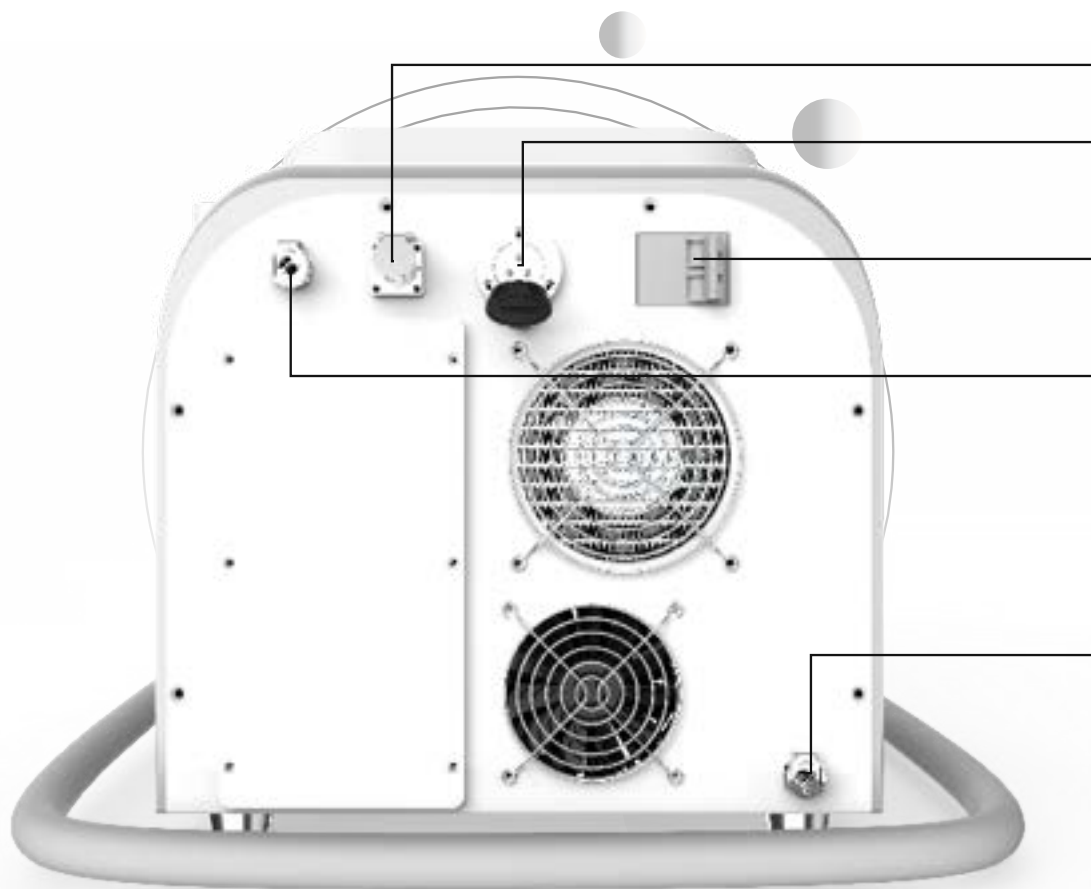

- Interruptor de pie
- 110/220V Enchufe de aviación
- Interruptor anti desbordamiento
- Flujo de aire
- Water Input
- Water output



Actualizar enchufe

USED

Conector hembra



Conector



Ventajas:

El enchufe viejo es difícil de instalar para las mujeres.

El nuevo tipo adopta una varilla de tornillo para girar e instalar, ahorrando instalación y sin mal contacto.

Nuevo estilo

Conector hembra



Conector



Perilla de refuerzo



Especificaciones

Laser tipo	Diodo láser de alta intensidad
Potencia de salida del mango láser	1200W
Total Potencia	4200W
Longitud de onda	755+808+940+1064nm
Disparos	100 millones disparos
Fluencia	10~80J/cm ²
Ancho de pulso	10-100ms
Tamaño de punto	12mm*12mm
Frecuencia	1~10Hz
Temperatura del cabezal de tratamiento	Max -16 °C
Sistema de refrigeración	Constant temperature refrigeration 25
Monitor	10.4 Inch multi color screen
Tamaño del paquete	62*40*40CM
Peso	30Kg



Ventaja tecnológica

- La barra láser coherente importada de EE. UU. Es más estable. Y la energía láser de salida de alta potencia de 1200 W puede lograr la mejor depilación.
- Baja inversión y alto rendimiento. El cabezal de tratamiento está garantizado por 2 años sin limitación.
- El módulo de refrigeración a temperatura constante mantiene la temperatura del agua a unos 20-25 grados, lo que puede garantizar que el sistema funcione continuamente durante 48 horas sin parar stop
- Usando la tecnología avanzada de enfriamiento por contacto con TEC y zafiro, la temperatura terminal se controla por debajo de 5 ° C, y la piel se enfría adecuadamente durante el proceso de eliminación del vello, al tiempo que garantiza la posibilidad de cero congelación.
- La frecuencia alcanza 10hz, el tratamiento es más rápido.
- El láser de longitud de onda de 808 nm apuntó a la destrucción de los pigmentos del folículo piloso.



Ventaja tecnológica

- Duración de pulso de 10-100 ms para garantizar la destrucción sin dolor de los folículos capilares
- El láser de diodo destruye permanentemente los folículos pilosos, y el cabello restante será muy pequeño sin afectar la apariencia.
- La pantalla de visualización del cabezal de tratamiento muestra la temperatura de enfriamiento en consecuencia, lo que hace que la operación sea más conveniente.
- Mango súper ligero para reducir la dificultad del trabajo del operador y aumentar el valor de la experiencia.
- El modo normal y el modo rápido son opcionales, la depilación rápida también puede guardar 5 parámetros de uso común, conveniente y rápido
- Conector de refuerzo en espiral, puede insertar el cabezal de tratamiento fácilmente



Ventaja tecnológica

Trata todos los colores de cabello, desde cabello negro hasta

cabello claro

Trata todo tipo de piel, desde la piel blanca hasta la oscura.

Sin dolor; sesiones cortas de tratamiento

Tratamiento efectivo y seguro para la depilación permanente



Ventaja tecnológica

01

Afeitarse el cabello del área de tratamiento (retener 1-2 mm)



02

Limpiar el área de tratamiento.



03

Aplicar gel frío



04

El operador se pone gafas



Ventaja tecnológica

05

Los clientes ponen en Eyegoogle



06

Ajuste los parámetros para el tratamiento.



07


Después del tratamiento, limpie el sitio de tratamiento para evitar la foliculitis.



08

Limpiar el cabezal de tratamiento.



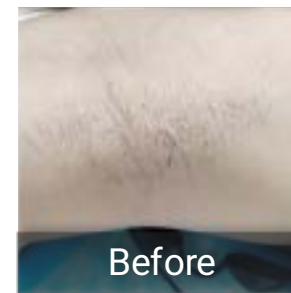


Before - After

INDEEPRO 448khz


* DIATERMIA CAPACITIVA Y RESISTIVA *



LA REVOLUCIÓN Tecnología A 448 kHz en

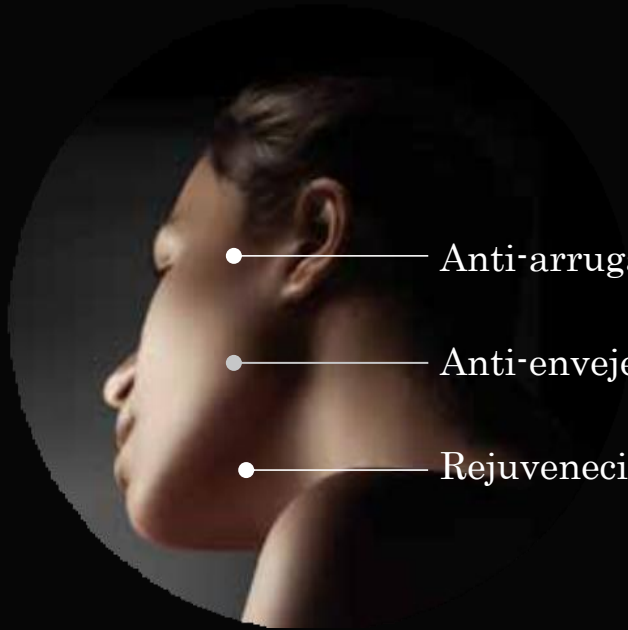

- Anti-arruga
- Anti-envejecimiento
- Rejuvenecimiento

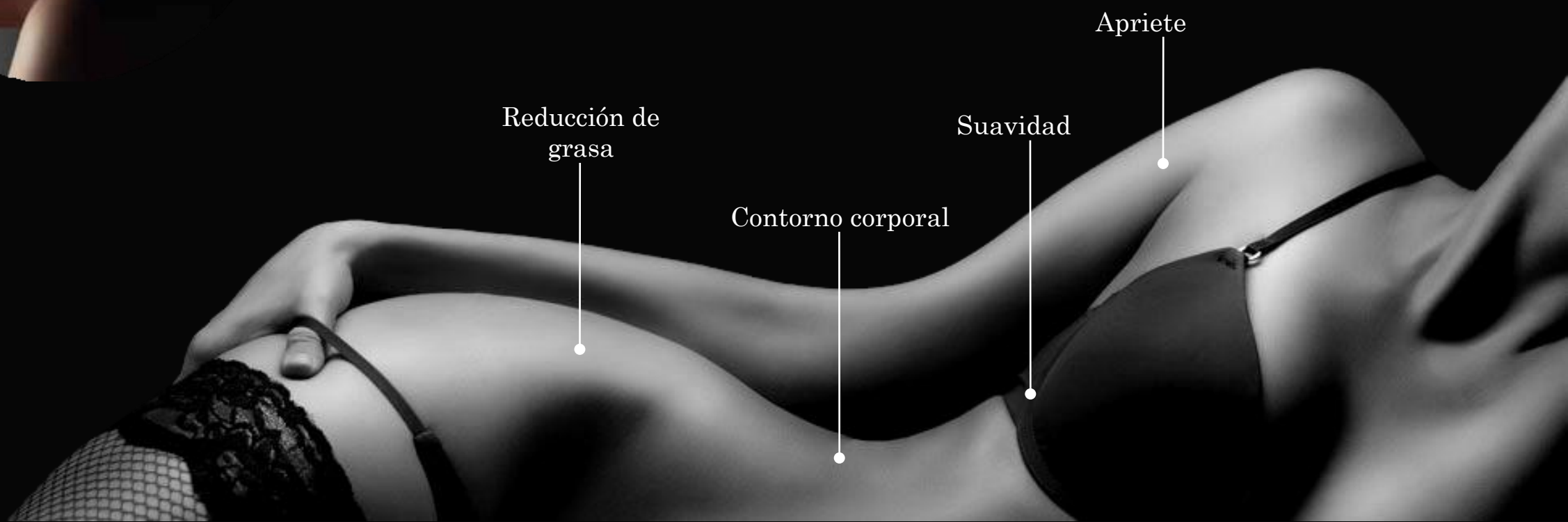

Reducción de
grasa

Contorno corporal

Suavidad

Apriete

¿QUÉ ES INDEEPLUS 448KHZ?

Indeepplus 448KHZ es una radiofrecuencia única y patentada, denominada radiofrecuencia Proionic®, que ofrece tratamientos agradables y eficaces para el realce facial y corporal.

La última innovación en aparatos estéticos INDEEPLUS 448KHZ es una nueva solución increíblemente versátil que le permite tener una amplia variedad de tratamientos en un solo dispositivo, a la frecuencia de 448kHz.

Es indicado para el estiramiento de la piel, el estiramiento de la piel, la reducción de la celulitis, el contorno corporal y aplicaciones pre y postoperatorias.

Es la solución más avanzada del mercado, porque pone a tu alcance la última tecnología médico-estética de vanguardia. Una verdadera alternativa que te permite dar un paso más, rentabilizando tu inversión en menos tiempo.





Aumentando la temperatura corporal central hasta 40-50 °C



Expansión de arteria y capilar.



Aumento de la tasa de flujo sanguíneo.



Aumento de Colágeno

Estimulación del sistema inmunológico

Aumento del metabolismo

Eliminación de toxinas




Levantamiento facial

Saludable

Cuidado de la obesidad

Reduce el dolor

RF diathermy

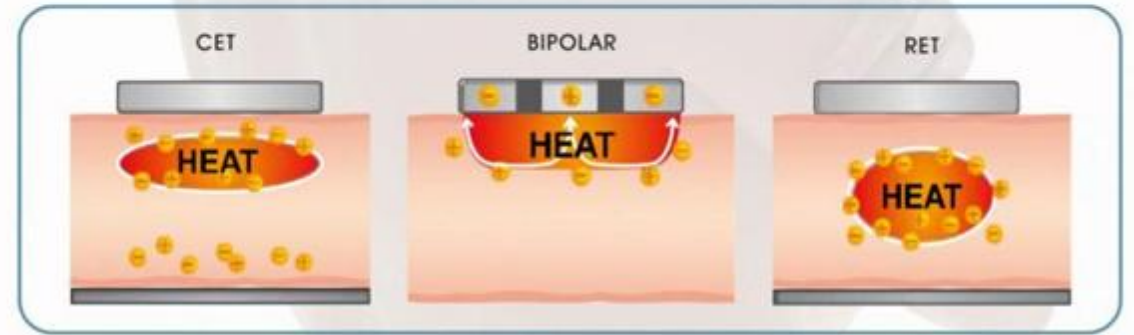

CAP (transferencia electrónica capacitiva)
3 a 5 cm de profundidad



Tratamiento de diatermia resistiva con el sistema de vacío






El electrodo capacitivo concentra la terapia en las capas musculares.

Apuntando a los tejidos superficiales de 3-5cm de piel, el efecto es reafirmante y anti-envejecimiento, ayuda a restaurar la elasticidad de los vasos sanguíneos, reconstruye el sistema de microcirculación, proporciona más nutrientes para los fibroblastos, fortalece la síntesis de colágeno, mejora el flujo de las células. de oxígeno reactivo, restaurando así la viabilidad celular y reconstruyendo la capa reticular.

Electrodo HSP

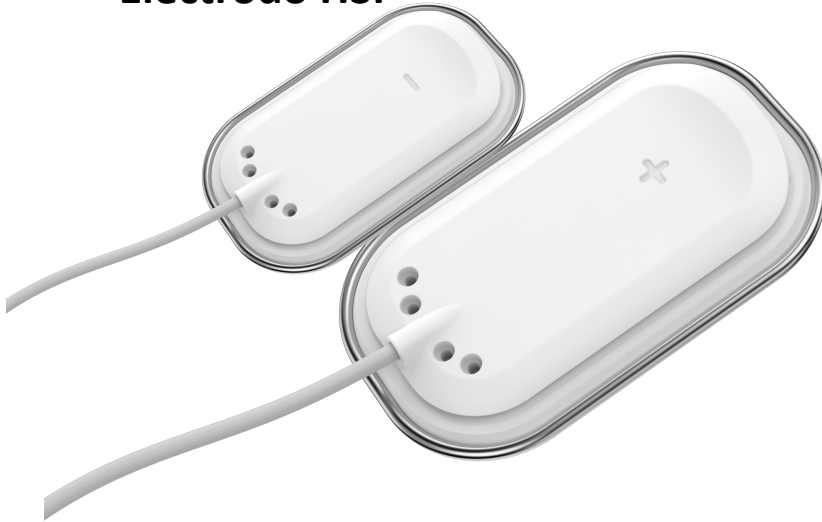

Puede mejorar significativamente la circulación sanguínea y linfática, aumentar el metabolismo, acelerar la descarga de toxinas depositadas en el cuerpo y activar la energía regenerativa del cuerpo.



El electrodo resistivo apunta al tejido con mayor impedancia, como inserciones musculares, tendones y superficies óseas.

Apuntando a los tejidos profundos de la piel de 6-8 cm para la grasa visceral, el efecto es una reparación profunda para ayudar a disolver y suavizar la grasa rebelde profunda y excretar la grasa a través de la circulación, al tiempo que alivia el dolor articular y drena el cuerpo del frío. Mejora eficazmente la tensión muscular, elimina el ácido láctico, limpia los meridianos y haz que todas las células del cuerpo realicen ejercicio aeróbico.

VENTAJA



1. La potencia de salida de RF es más suficiente, la potencia máxima es de 300 W y la energía aumenta más rápido.

2. Agregue el sistema Vacuum a su tratamiento Agregue a su tratamiento de Diatermia Resistiva el sistema Vacuum, que ayudará en el tratamiento movilizandando la grasa y aumentando el drenaje.

3. Ajuste dinámicamente la profundidad de acción de la energía y ajuste automáticamente el flujo de energía para garantizar que el tejido pueda recibir el tratamiento más eficaz, que el tratamiento sea más completo y el efecto sea mejor.

4. Perciba el tipo de cabezal de tratamiento para ajustar la forma de onda de salida y la energía para hacer que la salida sea más estable y controlable.



5. Percepción en tiempo real de la impedancia del circuito corporal, ajustando así la salida, haciendo que la experiencia sea más cómoda.

ESPECIFICACIONES

Nombre	Indeeplus RF 448khz
Frecuencia	448KHZ
Mangos de tratamiento	CAP y RES
Potencia de salida	500W
Electrodo capacitivo monopolar:	φ30 , 40,50 , 70mm
Electrodo resistivo monopolar:	φ30 , 40,50 , 70mm
Cabezal HSP	143*86mm
Dimensiones de la máquina	318*294*498 mm
Peso neto	14.6Kg
Paquete	480*385*498(mm)



INTERFAZ

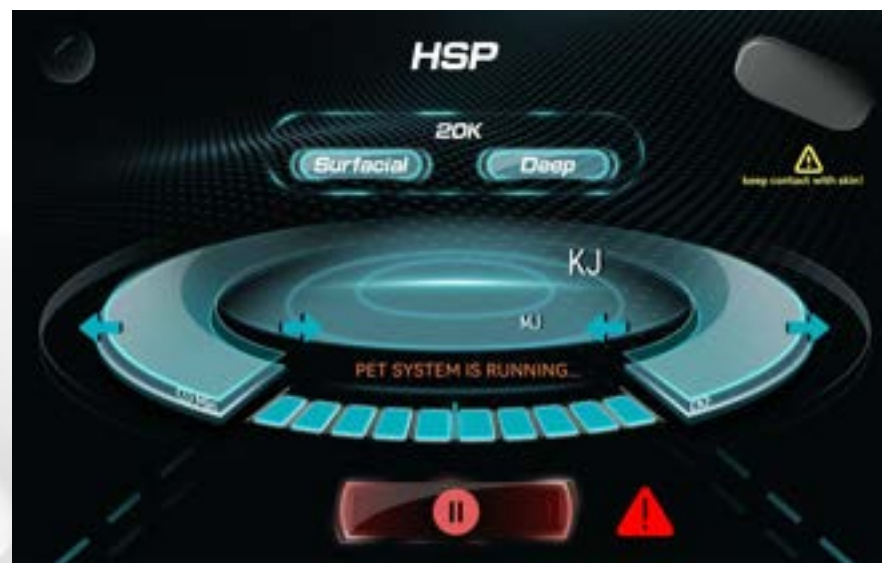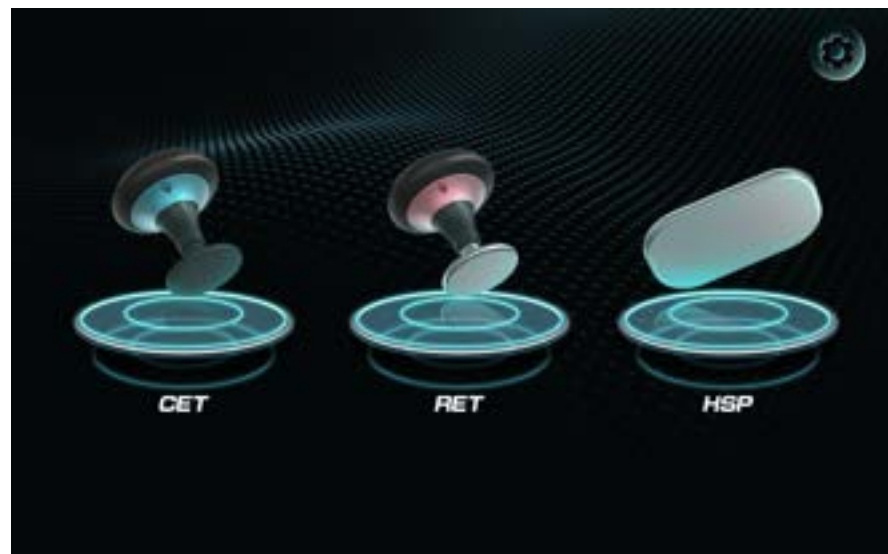

TRATAMIENTO FACIAL



Para el tratamiento facial, ayuda a regenerar la estructura de la piel aumentando la síntesis de colágeno y fibras elásticas, de manera que los tejidos desestructurados se hidratan y oxigenan, mejorando así su calidad, engrosando la piel y dándole mayor resistencia.



Reducir las arrugas finas

Mejora las bolsas de los ojos y las ojeras.

Rejuvenecimiento facial

Reducir la papada

Un curso contiene 6 tiempos de tratamiento


Cada tratamiento dura alrededor de 40 minutos.

Tiempo de intervalo 1-2 semanas

TRATAMIENTO CORPORAL



Para el tratamiento corporal, puede reequilibrar el intercambio celular de iones y aumentar el metabolismo, oxigenando así los tejidos y ayudando a las células a restaurar sus funciones naturales. Como resultado, el tejido cutáneo recupera la elasticidad perdida, la grasa desaparece gradualmente, se restaura la microcirculación correcta y, en general, la piel se rejuvenece.

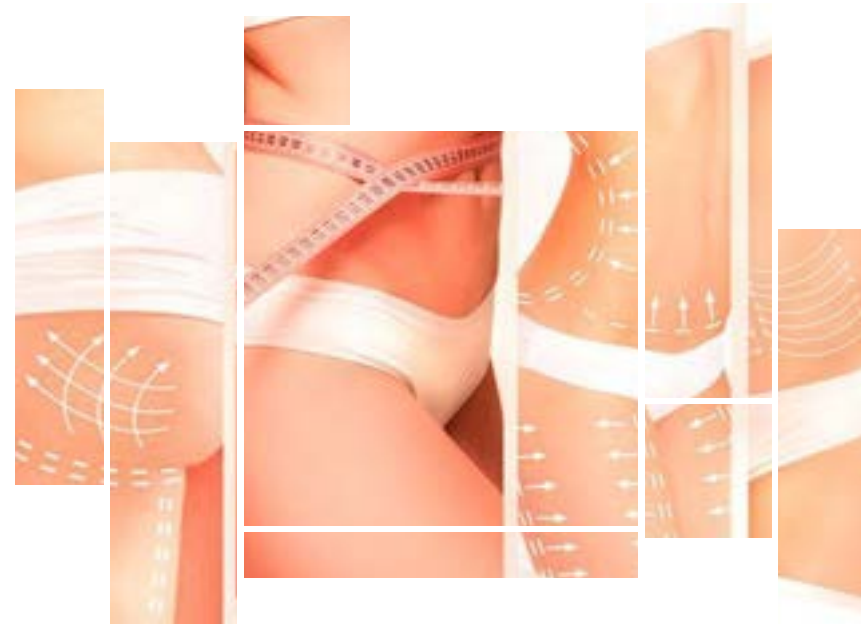

Reducción de grasa

- **Remodelación corporal**
- **Tratamiento de celulitis y reconstrucción cutánea parcial.**
- **Aumenta el nivel de colágeno**
- **Apriete la piel suelta**
- **Relajación muscular, alivio del dolor.**

CURSO DE TRATAMIENTO



¿Cuántas sesiones de tratamiento INDEEPLUS necesitamos?

Dependiendo de las indicaciones y áreas de tratamiento, puede ser necesario un rango de 5-6 u 8-10 sesiones. El número de sesiones se adaptará de acuerdo con la prescripción médica y la necesidad individual del paciente.

¿Con qué frecuencia se pueden realizar los tratamientos?

Por lo general, hay de 1 a 2 sesiones de tratamiento a la semana, pero no hay limitación. Como la radiofrecuencia 448khz es completamente inofensiva para el cuerpo humano y sus tejidos biológicos. La frecuencia de las sesiones se adaptará según las necesidades del paciente.

A woman with long dark hair is lying down, looking upwards. Her right arm is extended, and a treatment device is applied to her upper arm. The device has a grid of small lights or sensors. The background is a soft, out-of-focus light.

¿CUÁ LES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS PRODUCIDOS POR INDEEPLUS 448KHZ?

No hay efectos secundarios ya que la radiofrecuencia Proionic® es inocua para el cuerpo humano y sus tejidos biológicos. Sin embargo, en ocasiones algunas pieles muy sensibles pueden experimentar enrojecimiento y hormigueo.

¿EL TRATAMIENTO ES DOLOROSO?

No, el tratamiento aumenta de forma gradual y homogénea la temperatura en zonas seleccionadas del cuerpo respetando la fisiología celular. Por tanto, produce un tratamiento agradable, no invasivo y sin efectos adversos.

¿CUÁ LES SON LAS CONTRAINDICACIONES?

- Marcapasos u otros implantes electrónicos
- El embarazo
- Piel no intacta (heridas abiertas o quemaduras)
- Tromboflebitis